

enovis™

*Creating Better Together™*

# Produktübersicht 2025/2026

Gemeinsam für ein Leben in Bewegung  
Österreich



# ÜBERBLICK

**Innovative Produkte  
für bessere Therapieergebnisse  
und Arbeitsabläufe**

Sehr geehrte Partner,  
sehr geehrte Kunden,

mit großer Freude möchte ich mich Ihnen als neuer  
Director Sales & Marketing für die DACH-Region bei  
Enovis vorstellen.

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in der Führung  
und Weiterentwicklung von Geschäftsbereichen in der  
Medizintechnik bringe ich ein tiefes Verständnis für die  
Anforderungen unserer Branche mit. Mein Fokus lag da-  
bei stets darauf, innovative Lösungen voranzutreiben und  
nachhaltige Partnerschaften aufzubauen – immer mit dem  
Ziel, die Patientenversorgung dauerhaft zu verbessern.

Die letzten Jahre haben einen signifikanten Wandel im Gesundheitswesen mit sich  
gebracht, der weitreichende Auswirkungen auf alle Akteure im Gesundheitsmarkt  
hat – von den Leistungserbringern über die Kostenträger bis hin zu den Patienten.

Wir sind fest davon überzeugt, dass wir diese Herausforderungen nur gemeinsam  
bewältigen können.

Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen,  
sondern auch als Wegbereiter innovativer, ganzheitlicher Lösungen, die Ihre  
Bedürfnisse in einer sich dynamisch verändernden Versorgungslandschaft  
optimal unterstützen und unseren Patienten einen entscheidenden Vorteil in der  
Therapie verschaffen.

Somit wollen wir mit Ihnen neue Wege gehen, um den sich wandelnden  
Anforderungen gerecht zu werden.

Ich freue mich auf eine zukunftsorientierte und weiterhin erfolgreiche  
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit den besten Grüßen aus Freiburg

Ihr




Marc Kalmbach | Director Sales & Marketing | Enovis DACH



# EINBLICK

*Creating Better Together™*

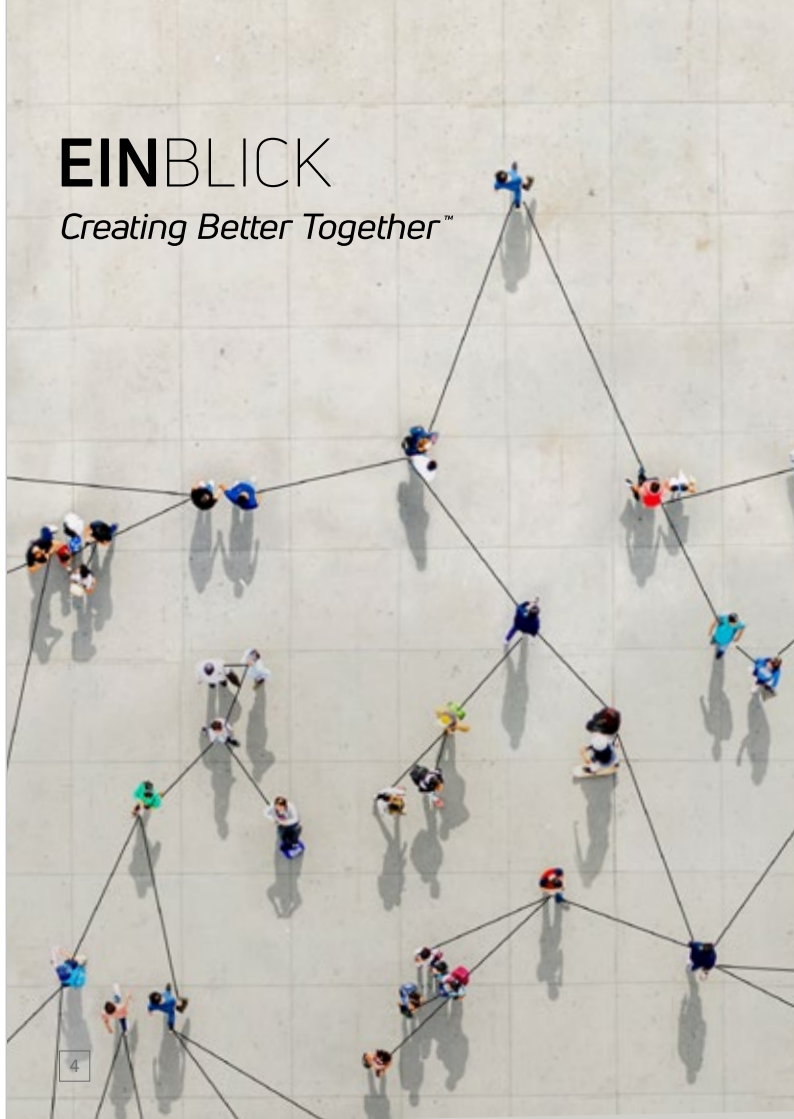

## Das Beste aus der Welt für Sie – vor Ort

Enovis ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Orthopädie- und Medizintechnik. Wir bieten ein einzigartig vielfältiges Spektrum an orthopädischen Hilfsmitteln und physikalischen Therapiekonzepten, die sich systematisch ergänzen. Damit eröffnen wir Ärzten, medizinischem Fachpersonal und dem Sanitätsfachhandel neue, innovative Behandlungsoptionen für alle Therapiephasen und nahezu jede Indikation – aus einer Hand: Prävention, Akutversorgung sowie prä- und postoperative Therapie!

## Creating Better Together

Als innovatives Medizintechnikunternehmen vereint Enovis fortschrittliche Produkte, zukunftsweisende Services und neue Technologien, damit Sie den aktiven Lebensstil von Patienten optimal fördern und auf ganzer Linie von einzigartigen Vorteilen profitieren können.

## Unsere Vision – Wir verändern Leben zum Besseren

Wir sind überzeugt, dass uneingeschränkte Bewegungskraft die Lebensqualität entscheidend fördert. Sie ist der Schlüssel zu besseren Therapieergebnissen, einem gesünderen Lebensstil und einer effektiveren Gesundheitsökonomie. Wir setzen jeden Tag alle unsere Stärken in Bewegung, um allen Menschen zu ermöglichen, ihr Leben aktiv zu gestalten und optimal zu leben.

## Unsere Mission – Gemeinsam für einen gesunden Lebensstil

Wir verbinden Erfahrung und Innovationskraft mit modernster Technologie, damit Menschen schneller wieder aktiv werden und bleiben: durch innovative Medizintechnik-Produkte und digitale Behandlungsmöglichkeiten, die medizinischen Fachkräften und Patienten einen Vorsprung in der Therapie verschaffen.

## Unsere einzigartige Markenvielfalt

Viele unserer Marken gehören seit Jahrzehnten zu den führenden in der Medizintechnikbranche. Als tragende Säulen unseres ganzheitlichen Versorgungsspektrums ermöglichen sie vielfältige Therapiemöglichkeiten und sichern den Therapieerfolg – in Form von hochentwickelten Hilfsmitteln, Konzeptlösungen und Technologien.

# RUNDBLICK

Unsere Mission: Ein aktiver Lebensstil für alle!



Über **250** Mitarbeiter  
in Deutschland, Österreich, Schweiz –  
über 8.000 Mitarbeiter weltweit



**3.500** betreute Kliniken und Arztpraxen  
in Deutschland, Österreich, Schweiz



**2.200** Partner im Sanitätsfachhandel  
in Deutschland, Österreich, Schweiz



Über **1.000.000** versorgte  
Patienten in Deutschland, Österreich, Schweiz



**120** Betreuer im CPM Home Care Service  
in Deutschland, Österreich, Schweiz



Aktiv in mehr als **100** Ländern



**12** Produktionsstätten auf der  
ganzen Welt



Weltweit unter den führenden Unternehmen  
in der Orthopädie- und Medizintechnik

# AUSBLICK

Markenstärke als Fundament unseres ganzheitlichen Versorgungskonzeptes für Ihren Therapieerfolg

## AIRCAST

Erfahrung und intensive Forschung sind die Basis des millionenfach bewährten Konzeptes für die Therapie von Fuß- und Sprunggelenkverletzungen. Vertrauen, das nicht nur Sportler und Patienten bewegt, sondern auch globale Standards setzt.

## DONJOY

Kontinuierliche Weiterentwicklung auf höchstem Niveau verschafft der Marke Expertenstatus für die Therapie von Knie, Hand, Schulter und Rücken. Als optimale Lösung für anspruchsvolle Krankheitsbilder wird DONJOY® weltweit geschätzt und vielfach eingesetzt.

## EXOS

Die neue Generation von Orthesen fördert Therapie, Compliance und frühzeitige Mobilisation. Die Erfolge des durchdachten Konzeptes basieren auf einem hochleistungsfähigen, thermisch verformbaren Material mit optimaler Anpassungsfähigkeit.

## PROCARE

Hochwertige und starke Lösungen für die orthopädische Rundumversorgung kennzeichnen die Marke, die alles bietet, was eine effiziente Therapie erfordert. PROCARE® konzentriert sich dabei auf das Wesentliche – Menschen Bewegungskraft zurückzugeben.

## DR. COMFORT

Diesen Schuh zieht man sich gerne an. Weil die Comfortschuhe nicht nur zur Lösung von Fußproblemen ideal sind, sondern durch verschiedene Styles, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in jeder Lebenssituation ideale Wegbegleiter darstellen.

## ARTROMOT

Die motorisierten Bewegungsschienen, z. B. für Knie und Schulter, die nach dem CPM-Prinzip arbeiten, kommen weltweit zum Einsatz. Durch kontinuierliche, passive Bewegung kann die Heilung von Knorpeln, Sehnen und Bändern beschleunigt und das OP-Ziel gesichert werden.

## CHATTANOOGA

Stetige Innovation und konsequente Orientierung an den Anforderungen von Patienten und Therapeuten sind die Grundlage für Rehabilitationsgeräte, die Maßstäbe setzen. Als Spezialist für physikalische Medizin prägt CHATTANOOGA® den Markt seit mehr als sieben Jahrzehnten.

## ARTROJECT

Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit Hyaluronsäure kennzeichnen ARTROJECT® als Partner von Therapeuten/Chirurgen, wenn es um Gelenkoperationen geht. Der Sofortschutz ARTROJECT® wird im OP nach der Arthroskopie verabreicht und fördert den Heilungsverlauf.

## HYA-JECT

Mit hochreiner Hyaluronsäure kann HYA-JECT® Gelenkarthrose-Patienten helfen, Entzündungen und Schmerzen zu reduzieren. Seine Qualität und Anwendersicherheit, bedarfsgerechte Größen und Konzentrationen machen es dabei zum wertvollen Bestandteil einer modernen Therapie.

## ARTROSTAR

ARTROSTAR® versorgt beanspruchte Gelenke mit essenziellen Inhaltsstoffen in anwenderfreundlichen Darreichungsformen: Als hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel unterstützt es die reibungslose Bewegung von Gelenken oder wirkt als Intensiv-Pflegegel wohltuend warm auf den Bewegungsapparat.



# SCHARFBlick

Partnerprogramme, die Ihren Bedarf treffen

## C.O.R.E.<sup>®</sup>

Circle of Orthopedic Excellence

### Mit C.O.R.E.<sup>®</sup> die Zukunft sichern

Das Geschäft der Zukunft im Sanitätsfachhandel sieht anders aus. Nehmen Sie die Herausforderung an und werden Sie zum führenden Gesundheitspartner. Wir helfen Ihnen dabei. Unser Angebot für Sie:

#### Circle of Orthopedic Excellence

Als Partner im Enovis C.O.R.E.<sup>®</sup>-Programm profitieren Sie von einem einzigartigen Komplettpaket aus Strategie, Wissen und Leistungen.

**WISSENSNETZWERK** – Auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Fortbildungen, Trainings und Workshops sowie exklusive Events zum Netzwerken und Wissensaustausch.

**PRODUKTE** – Exklusive Sonderangebote, Anwendertreffen und Individualisierung für die Abgrenzung zum Wettbewerb.

**SERVICES** – Individuelle Marketingunterstützung und lohnenswerte Kooperationen für Ihren Erfolg.

**Mit C.O.R.E.<sup>®</sup> sind Sie dem Markt immer ein Stück voraus.**

Informieren Sie sich:  
[https://www.enovis-medtech.at/  
unternehmen/partnerprogramm-core](https://www.enovis-medtech.at/unternehmen/partnerprogramm-core)



# DURCHBLICK

Fortbildungen für Ärzte, die Sie weiterbringen

Mit

## F.A.M.E.®

Forum for Advanced Medical Education

bietet Enovis seit über 20 Jahren Fortbildungen auf höchstem Niveau und damit passgenaue Angebote für jede medizinische Zielgruppe.

Die F.A.M.E.®-Fortbildungsreihen zeichnen sich durch thematische Vielfalt und praxisnahe Inhalte aus. Vom fokussierten F.A.M.E.® specialty day über das OP- und Verfahrenstraining F.A.M.E.® hands-on bis zum jährlichen Kongress-Highlight ORMEDICUM® ist jede Veranstaltungsreihe auf die Anwendbarkeit der vermittelten Inhalte in der Praxis ausgerichtet.

**FORTBILDUNG:** Über 20.000 Teilnehmer, mehr als 300 Veranstaltungen, 1.800 Referenten – das ist die erfolgreiche Bilanz unserer Fortbildungen auf höchstem wissenschaftlichen Niveau.

**Für diese Qualität steht F.A.M.E.® auch in Zukunft.**



© Kongressfotos: Simon Housberger



[fame.fortbildungen](https://fame.fortbildungen)



[fame.forum](https://fame.forum)



[www.fame-forum.de](https://www.fame-forum.de)

# VORAUSSBLICK

Notfallversorgung der Zukunft –  
Ressourcen sparen durch den Einsatz von Hilfsmitteln



Informieren Sie sich:  
<https://www.enovis-medtech.at/gesundheits/therapie-mit-system/notfallkonzept>



Die Ambulantisierung und die Krankenhausreform führen zu einer stetigen Reduzierung der Kliniken, was eine zunehmende Verlagerung von Patienten in die verbleibenden Einrichtungen sowie den ambulanten Bereich zur Folge hat. Dies erhöht das Patientenaufkommen in den bestehenden Kliniken und stellt gleichzeitig neue Anforderungen an die Versorgung im ambulanten Bereich. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, ist es notwendig, die Strukturen und Abläufe in der Notfallambulanz sowie in der ambulanten Versorgung zu optimieren. Als Hersteller von Medizinprodukten haben wir Konzepte entwickelt, um Sie gezielt und effektiv in Ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen.

## Ihre Herausforderung:

- Personal-, Fachkräfte- und Zeitmangel
- Vergütung der Therapieleistungen
- Sehr großer Anteil an orthopädischen und unfallchirurgischen Notfällen

## Ihre Ziele:

- Mehr Zeit am Patienten
- Wirtschaftlich arbeiten
- Wissen ausbauen

## Unsere Leistungen für Ihre Notfalltherapie:



### SCHNELL.

- Zeitsparendes Produktsortiment
- Schnelle Versorgung vor und nach der Behandlung
- Informationsbroschüren für Patienten
- Anlegeanleitungen



### EINFACH.

- Platzsparendes Produktsortiment
- Individualisierte Hilfsmittelübersicht als Poster
- Versorgungskonzepte



### QUALIFIZIERT.

- Regelmäßige Schulungen zu orthopädischen Hilfsmitteln
- Hilfsmittel-Coach vor Ort (Produkt-Training im Praxis-/Klinikalltag)
- MDR-Zertifizierung



### VERSORGT.

- Von Kopf bis Fuß
- Bewährte Markenprodukte
- Neueste Versorgungsstandards



## Orthopädietechnik

### ORTHESEN UND BANDAGEN

#### Fuß/Sprunggelenk

- AIRCAST® Airselect™ Elite Walker .....18
- AIRCAST® Airselect™ Achilles Walker .....20
- PROCARE® MiniTrax™ Walker .....22
- PROCARE® Nextep™  
Contour Air Walker .....24
- PROCARE® Nextep™ Shortie  
Air Walker .....24
- PROCARE® XcelTrax® Air Walker .....26
- PROCARE® Shoelift .....28
- AIRCAST® Airpro .....30
- AIRCAST® ActyFoot™ .....32
- AIRCAST® Airgo™ .....34
- AIRCAST® Air-Stirrup® .....36
- DONJOY® Fusioliight II™ .....38
- AIRCAST® A60™ .....40
- DONJOY® MalleoForce® .....42
- DONJOY® MalleoForce® Plus .....44
- PROCARE® Remedy Pro™ .....46
- DR. COMFORT® Comfortschuhe .....48

#### Knie

- DONJOY® Defiance® .....50
- DONJOY® Defiance® Farbkarte .....52
- DONJOY® 4Titute® .....54
- DONJOY® Armor .....56
- DONJOY® Fullforce™ .....58
- DONJOY® 4Titute® Advanced .....60
- ORMED® Artrocure® Pro3 .....62
- DONJOY® PM II Wrap Long .....64
- DONJOY® GenuForce® .....66
- DONJOY® GenuForce® Xpert .....68

- DONJOY® Support Everest Ice II .....70
- PROCARE® Kneeranger® II Universal .....72
- DONJOY® Reaction™ Web OA .....74
- DONJOY® OA Go .....76
- DONJOY® OA Nano™ .....78
- DONJOY® OA Adjuster 3 .....80
- DONJOY® Defiance® OA .....82
- DONJOY® Immo 3V (0° oder 20°) .....84

#### Hüfte

- ORMED® Newport® 3 .....86

#### Wirbelsäule

- DONJOY® LumboForce® 1 .....88
- DONJOY® LumboForce® 2 .....90
- DONJOY® LumboForce® .....92
- DONJOY® LumboForce® 5 .....94
- DONJOY® Actistrap .....96
- DONJOY® OsteoStrap .....98
- EMO Lumback Infinity Plus .....102
- EXOS® Form™ II 637 .....104
- EXOS® Form™ II 621 .....106
- DONJOY® IsoFORM™ SIO .....108
- DONJOY® MyBabyStrap™ .....110

#### Hand/Arm

- EXOS® Orthesenübersicht .....112
- EXOS® Manu .....114
- EXOS® Manu Advance .....116
- EXOS® Carpa .....118
- EXOS® Polax .....120
- EXOS® Rhiza .....122
- EXOS® Boxer 4/5 .....124
- EXOS® Manu Polax .....126

- DONJOY® DigiForm+™ .....128
- DONJOY® DuoForm™ .....130
- DONJOY® ManuForm™ .....132
- DONJOY® ManuForm + .....134
- DONJOY® RhizoForm™ .....136
- DONJOY® ErgoForm™ .....138
- DONJOY® EpiForce® .....140
- DONJOY® EpiForce® Strong .....142
- PROCARE® Elbow Ranger® .....144
- DONJOY® X-Act ROM Elbow .....146

#### Schulter

- DONJOY® Ultrasling® Quadrant .....148
- DONJOY® PSI Plus .....150
- DONJOY® Ultrasling® III .....152
- AIRCAST® Arm Immobilizer .....154

#### Kältetherapie

- AIRCAST® Cryo/Cuff™  
Kanne .....156
- AIRCAST® Cryo/Cuff™  
Kniebandage .....158
- AIRCAST® Cryo/Cuff™  
Schulterbandage .....160



Dieses Produkt ist auch  
für Kinder erhältlich.

## Medizintechnik

### Bewegungsschienen

- ARTROMOT® Home-Care Service .....162
- ARTROMOT® ACTIVE-K .....164
- ARTROMOT®-K1 .....166
- ARTROMOT®-S3 .....168
- ARTROMOT®-S4 .....170
- ARTROMOT®-E2 .....172
- ARTROMOT®-SP3 .....174

### Stoßwellentherapie

- CHATTANOOGA® Intellect® RPW 2  
Stoßwelle .....176
- CHATTANOOGA® Mobile RPW 2  
Stoßwelle .....178
- CHATTANOOGA® Intellect® F-SW  
Stoßwelle .....180

### Elektro-, Ultraschall- und Lasertherapie

- CHATTANOOGA® Intellect® Mobile 2 .....182
- CHATTANOOGA® LightForce HPL .....184
- CHATTANOOGA® Wireless Professional .....186

### Traktions- und Dekompressionstherapie

- SAUNDERS Heimgeräte .....188
- CHATTANOOGA® Triton 6E DTS® .....190

### Behandlungsliegen

- CHATTANOOGA® Montane .....192
- CHATTANOOGA® Galaxy .....194

### Neuromuskuläre Analyse und Training

- CHATTANOOGA®  
Huber 360® Evolution .....196

### Kinesio-Tape

- CHATTANOOGA® Chatt-Tape .....198

## AIRCAST® Airselect™ Elite Walker

Unterschenkel-Orthese (Walker) lang



AIRCAST® Airselect™  
Short Walker

### Wirkungsweise/Aufbau

- Immobilisierung im Unterschenkel- und/oder Fußbereich zur allgemeinen Mobilisierung
- Passgenaue und sichere Einbettung des Fußes durch drei individuell aufpumpbare Luftkammern
- Integrierte Luftpumpe
- Duplex™-Luftkammer-System fördert die Reduktion von Schmerzen und Schwellungen

- Hohe Stabilität bieten zwei feste Halbschalen mit individuell einstellbaren Klettgurten
- Komfortabler Sitz dank kompletter Schaumstoffauspolsterung im Schaftbereich
- Biomechanisch optimierte Abrollsohle durch SoftStrike Technologie

### Anwendungsgebiete

Stützung und Immobilisierung des Unterschenkels, Sprunggelenks und Fußes bei folgenden Indikationen:

- Stabile Sprunggelenk- und/oder Fußfrakturen
- Schwere laterale Knöchelverstauchungen

### Rezeptierung

AIRCAST Airselect Elite Walker  
Unterschenkel – Orthese Walker – lang

### Positionsnummer

34373 021  
rückversicherungsfähig beim jeweiligen  
Sozialversicherungsträger

### Facharztrichtung

F

| Größe | Schuhgröße | Seite | Artikel-Nr. |
|-------|------------|-------|-------------|
| XS    | < 35       | U     | 01EP-XS-DE  |
| S     | 35–38      | U     | 01EP-S-DE   |
| M     | 39–42      | U     | 01EP-M-DE   |
| L     | 43–45      | U     | 01EP-L-DE   |
| XL    | > 45*      | U     | 01EP-XL-DE  |

\* Wadenumfang 51–64 cm

## AIRCAST® Airselect™ Achilles Walker

Unterschenkel-Orthese (Walker) mit Bewegungseinstellung




### Wirkungsweise/Aufbau

- Ruhigstellung im oberen Sprunggelenk mit limitierter Bewegungsfreigabe
- Der Achilles Walker vereint alle Eigenschaften des Elite Walkers
- Zur Einrichtung der Spitzfußstellung werden im Set 5 anatomisch geformte Keile in verschiedenen Größen mitgeliefert
- Drei Keile übereinander entsprechen ca. 22°, zwei ca. 16° und ein Keil ca. 10°
- Biomechanisch optimierte Abrollsohle durch SoftStrike Technologie

### Anwendungsgebiete

- Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung
- Achillessehnenrupturen
- Postoperativ bei perkutaner und offener Achillessehnennaht

### Zusammensetzung der Fersenkeile pro Größe

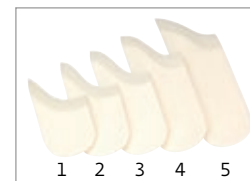

S: 1–3  
M: 2–4  
L: 3–5  
XL: Extra Keile-Set erhältlich

### Rezeptierung

AIRCAST Airselect Achilles Walker

### Positionsnummer

34344 034  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

| Größe | Schuhgröße | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|-------|------------|-------------------|--------------------|
| S     | 35–38      | 01EK-SL           | 01EK-SR-DE         |
| M     | 39–42      | 01EK-ML           | 01EK-MR-DE         |
| L     | 43–45      | 01EK-LL           | 01EK-LR-DE         |
| XL    | > 45*      | 01EK-XLL          | 01EK-XLR-DE        |

\* Wadenumfang 51–64 cm

## PROCARE® MiniTrax™ Walker

Unterschenkel-Orthese (Walker) lang



### Wirkungsweise/Aufbau




- Immobilisierung im Unterschenkel- und/oder Fußbereich zur allgemeinen Mobilisierung
- Geringes Gewicht trägt zu hohem Tragekomfort bei
- Anatomisch geformte Stützen
- 3-fach Gurtsystem
- Niedrige Sohle

### Anwendungsgebiete

Der PROCARE® MiniTrax™ Walker dient zur Stützung und Immobilisierung des Unterschenkels, Sprunggelenks und Fußes bei folgenden Indikationen:

- Stabilen Fußfrakturen
- Bandverletzungen wie Plantarfasciitis
- Sehnenverletzungen wie Achillessehnenreparatur
- Lateralen Sprunggelenksverstauchungen

Lustige, kindgerechte Motive bringen Spaß beim Anziehen

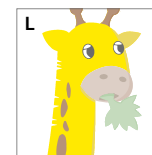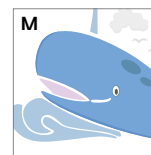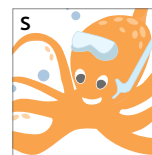

### Rezeptierung

PROCARE MiniTrax  
Unterschenkel – Orthese Walker – lang

### Positionsnummer

34373 053  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharzttrichtung

F

| Größe | Artikel-Nr. | Alter in Jahren* | Fußlänge     | Beinlänge | EUR Schuhgröße |
|-------|-------------|------------------|--------------|-----------|----------------|
| S     | 79-95510    | 1–2,5            | < 15,2 cm    | < 23 cm   | < 25           |
| M     | 79-95520    | 2,5–5            | 15,2–17,8 cm | < 28 cm   | 25–29          |
| L     | 79-95530    | 5–8              | 17,8–20,3 cm | < 36 cm   | 29–33          |

\* unter Vorbehalt

## PROCARE® NEXTEP™ Contour Air Walker NEXTEP™ Shortie Air Walker

Unterschenkel-Orthese (Walker) lang und kurz



NEXTEP™ Shortie  
Air Walker

### Wirkungsweise/Aufbau

- Immobilisierung im Unterschenkel- und/oder Fußbereich zur allgemeinen Mobilisierung
- Hohe Stabilität durch zwei feste Halbschalen mit individuell einstellbaren Klettgurten
- Sichere Einbettung von Fuß und Unterschenkel in gepolstertem Innenschuh mit zwei Luftkammern im Knöchelbereich
- Integrierte Pumpe zur individuellen Befüllung der Luftpolster
- Abrollsohle

### Anwendungsgebiete Contour Air Walker

Der PROCARE® Nextep™ Contour Air Walker dient zur Stützung und Immobilisierung des Unterschenkels, Sprunggelenks und Fußes bei folgenden Indikationen:

- Stressfrakturen der unteren Extremität
- Stabilen Sprunggelenkfrakturen
- Achillessehnenreparaturen
- Akute laterale Knöchelverstauchungen

### Anwendungsgebiete Shortie Air Walker

Der PROCARE® Nextep™ Shortie Air Walker dient zur Stützung und Immobilisierung des Sprunggelenks und Fußes bei folgenden Indikationen:

- Stressfrakturen der unteren Extremität
- Stabile Fuß- und/oder Sprunggelenkfrakturen
- Akute lateralen Knöchelverstauchungen

### Rezeptierung

PROCARE Nextep Contour Air Walker  
Unterschenkel – Orthese Walker – lang

### Positionsnummer

34373 060  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Rezeptierung

PROCARE Nextep Shortie Air Walker  
Unterschenkel – Orthese Walker – kurz

### Positionsnummer

34374 016  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharzttrichtung

F

| Seite | Größe | Schuhgröße | Art.-Nr. Contour | Art.-Nr. Shortie |
|-------|-------|------------|------------------|------------------|
| U     | S     | < 39       | 79-95273         | 79-95443         |
| U     | M     | 39–44      | 79-95275         | 79-95445         |
| U     | L     | > 44       | 79-95277         | 79-95447         |



## PROCARE® XcelTrax® Air Walker

Unterschenkel-Orthese (Walker) lang



### Wirkungsweise/Aufbau

- Anatomisch geformte Stabilisatoren ermöglichen gute Passform
- Integrierte Pumpe für intuitives Aufpumpen und individuelle Anpassbarkeit
- Leichter Aufbau für hohen Tragekomfort
- Spezieller Aufbau der Innen- und Außensohle hilft, Stöße beim Fersenauftritt zu absorbieren
- Integrierte Gurte sorgen für umfassende Unterstützung

### Anwendungsgebiete

- Verstauchungen des Sprunggelenks
- Verletzungen des Weichgewebes am Unterschenkel
- Spannungsfrakturen am Unterschenkel und am Sprunggelenk
- Stabile Frakturen am Fuß und am Sprunggelenk

### Rezeptierung

PROCARE XcelTrax Air Walker  
Unterschenkel – Orthese Walker – lang

### Positionsnummer

34373 064  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

| Größe | Schuhgröße | Seite | Artikel-Nr. |
|-------|------------|-------|-------------|
| XS    | < 36       | U     | 79-95512-1  |
| S     | 36–39      | U     | 79-95513-1  |
| M     | 39–43      | U     | 79-95515-1  |
| L     | 44–46      | U     | 79-95517-1  |
| XL    | > 46       | U     | 79-95518-1  |

## PROCARE® Shoelift™

Höhenausgleichssohle



### Wirkungsweise/Aufbau

- Ausgleich von Beinlängendifferenzen beim Tragen von Fußorthesen
- Unterstützt die Verringerung der körperlichen Anstrengung beim Tragen eines Gipses oder einer Unterschenkel-Fuß-Orthese
- Einfach und schnell anzulegen
- In drei Größen erhältlich

### Anwendungsgebiete

- Ausgleich von Beinlängendifferenzen beim Tragen einer Gehorthese aufgrund von Frakturen
- Empfohlen für die Verwendung über einem fest zugeschnürten geschlossenen Schuh oder Turnschuh

### Rezeptierung

PROCARE Shoelift

| Größe | Schuhgröße | Seite | Artikel-Nr. |
|-------|------------|-------|-------------|
| S     | < 41       | U     | 79-95603    |
| M     | 41–44      | U     | 79-95605    |
| L     | > 44       | U     | 79-95607    |

## AIRCAST® Airpro

Sprunggelenksorthese (L-förmig)



### Wirkungsweise/Aufbau

- Seitliche Stabilisierung bei voller Belastbarkeit und deutlich eingeschränkter Beweglichkeit, Vorschubhemmung
- 3-Phasen-Modell ermöglicht die optimale Versorgung in jeder Therapiephase
- Thermoplastisch verformbare flexible Schalen für optimale Anpassung in Phase 2 und 3
- Innovativer BOA®-Verschluss für individuelle Passformregulierung
- 8er-Gurt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit des Sprunggelenks
- Einzigartiges Step-in-Design für ein einfaches Anlegen auch bei starker Schwellung

\* Die Marke BOA® ist das Eigentum der BOA Technology, Inc.

### Anwendungsgebiete

Die AIRCAST® Airpro dient zur Unterstützung und Stabilisierung bei folgenden Indikationen:

- Bänderrisse
- Verstauchungen
- Chronische Instabilität
- Postoperativ

### Rezeptierung

AIRCAST Airpro  
Sprunggelenkorthese

### Positionsnummer

34232 033  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

| Größe | Schuhgröße | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|-------|------------|-------------------|--------------------|
| XS    | 30–34      | 82-0268-1         | 82-0267-1          |
| S     | 34–37      | 82-0268-2         | 82-0267-2          |
| M     | 37–42      | 82-0268-3         | 82-0267-3          |
| L     | 42–46      | 82-0268-4         | 82-0267-4          |
| XL    | > 46       | 82-0268-5         | 82-0267-5          |

| Zubehör           | Größe | Schuhgröße | Seite | Artikel-Nr. |
|-------------------|-------|------------|-------|-------------|
| 8er-Gurt          | U     | U          | U     | 82-0269     |
| Verlängerungsgurt | U     | U          | U     | 82-0270     |

## AIRCAST® ActyFoot™

Sprunggelenksorthese (L-förmig)



### Wirkungsweise/Aufbau

- Vorfußgurt mit Kompressionseffekt
- Abrüstbarer lateraler Stabilisator
- Unelastischer diagonaler Gurt unterstützt die Reduktion der Supinationsbewegung und des Talusvorschubs

### Anwendungsgebiete

Stützt, stabilisiert und bietet teilweise Immobilisierung des Knöchels

- Akute Seitenbandverletzungen
- Akute Knöchelverstauchungen und Bandrupturen
- präoperative chronische Knöchelinstabilität
- Schutz des Sprunggelenkes (konservativ, prä- und postoperativ)

### Rezeptierung


AIRCAST ActyFoot  
Sprunggelenkorthese

### Positionsnummer

34232 046  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

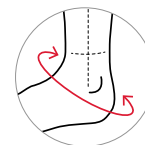

| Größe | Schuhgröße | Umfang*  | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|-------|------------|----------|-------------------|--------------------|
| S     | ≤ 38 cm    | ≤ 30 cm  | 82-02A-SL         | 82-02A-SR          |
| M     | 38-43 cm   | 30-34 cm | 82-02A-ML         | 82-02A-MR          |
| L     | ≥ 43 cm    | 34-36 cm | 82-02A-LL         | 82-02A-LR          |
| L+    | ≥ 43 cm    | ≥ 36 cm  | 82-02A-PL         | 82-02A-PR          |

\*Umfang diagonal über Ferse und Rist

## AIRCAST® Airgo™

Sprunggelenksorthese (U-förmig)



Die AIRGO™ ist durch das einzigartige Step-In-System kinderleicht anzulegen.



1. Step-In:  
einfach mit dem  
Fuß in die Orthese  
steigen



2. Strap-Up:  
Klettband fixieren

### Wirkungsweise/Aufbau

- Bestmöglicher Halt durch integrierte, anatomisch geformte Schalen
- Zusätzliche Stabilisierung und individuelle Einstellung der Supinations-/Pronationsbeschränkung durch das ATF-Zugband
- Einfache Anwendung auch bei starker Schwellung durch einzigartiges Step-in-Design
- Keine Beeinträchtigung des Abrollvorganges

### Anwendungsgebiete

Die AIRCAST® Airgo dient zur Stützung und Stabilisierung der Bänder bei folgenden Indikationen:

- Bänderrissen
- Schweren Verstauchungen
- Chronischer Instabilität

### Rezeptierung

AIRCAST Airgo  
Sprunggelenkorthese

### Positionsnummer

34231 110  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

| Größe | Schuhgröße | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|-------|------------|-------------------|--------------------|
| XS    | 30–34      | 02MXSLCE          | 02MXSRCE           |
| S     | 35–38      | 02MSLCE           | 02MSRCE            |
| M     | 39–42      | 02MMLCE           | 02MMRCE            |
| L     | 43–47      | 02MLLCE           | 02MLRCE            |
| XL    | > 47       | 02MXLLCE          | 02MXLRCE           |

## AIRCAST® Air-Stirrup®

Sprunggelenksorthese (U-förmig)



### Wirkungsweise/Aufbau

- Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks
- Seitliche Stabilisierung bei voller Belastbarkeit und gering eingeschränkter Plantarbewegung
- Schwellungs- und Schmerzreduktion durch Duplex™-Luftpolster
- Optimal geeignet für Akutversorgung dank hoher Stabilität und leichter Anwendung
- Keine Beeinträchtigung des Abrollvorgangs

Die Technologie:

- Durchgehende äußere Luftkammer mit einer im Knöchelbereich integrierten inneren Luftkammer

- Bei jedem Schritt werden die Luftkammern zwischen den starren Seitenschalen und dem Bein komprimiert
- Der höhere distale Druck nimmt dabei nach proximal ab
- Durch Lastwechsel, Gelenkbewegung und Muskelkontraktion entsteht eine graduelle, pulsierende Kompression, die zu einem raschen Schwellungsabbau beiträgt

### Anwendungsgebiete

- Die Aircast Air-Stirrup stabilisiert das Sprunggelenk zur Vermeidung weiterer Verletzungen
- Kann bei Knöchelverstauchungen, Bandverletzungen oder Instabilität eingesetzt werden

### Rezeptierung

AIRCAST Air-Stirrup  
Sprunggelenkorthese

### Positionsnummer

AIRCAST Air-Stirrup Small  
34231 012  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

AIRCAST Air-Stirrup Standard  
34231 013  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

AIRCAST Air-Stirrup Training  
34231 014  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharzttrichtung

F

| Größe        | Körpergröße | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|--------------|-------------|-------------------|--------------------|
| XS           | Kleinkinder | 02JL-DE           | 02JR-DE            |
| S            | < 1,57 m    | 02CL-DE           | 02CR-DE            |
| M (Training) | 1,57–1,67 m | 02BL-DE           | 02BR-DE            |
| L (Standard) | > 1,62 m    | 02AL-DE           | 02AR-DE            |



## DONJOY® Fusiolight II™

Sprunggelenksorthese (U-förmig)



Fusiolight II™ Kind

### Wirkungsweise/Aufbau

- Offenes Schalendesign sorgt für leichtes Gewicht
- Anatomisch geformte rigide Schalen
- Polster aus Memory Foam sorgt für Komfort und Druckentlastung

### Anwendungsgebiete

Die Fusiolight II™ dient zur Stützung des Sprunggelenks bei folgenden Indikationen:

- Leichte bis moderate Verstauchungen
- Chronische Instabilitäten

### Rezeptierung

DONJOY Fusiolight II  
Sprunggelenkorthese

### Positionsnummer

34231 129  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

| Größe | Körpergröße    | Orthesenhöhe | Artikel-Nr. |
|-------|----------------|--------------|-------------|
| S     | ≤ 1,5 m (Kind) | 17 cm        | 82-0052-1   |
| M     | 1,5–1,65 m     | 23 cm        | 82-0052-2   |
| L     | > 1,65 m       | 25,5 cm      | 82-0052-3   |

## AIRCAST® A60™

Sprunggelenksorthese (U-förmig)



### Anwendungsgebiete

- Die AIRCAST® A60™ Sprunggelenksorthese dient zur Stabilisierung und zum Schutz des Sprunggelenks
- Für die Akut- und Prophylaxeversorgung

### Rezeptierung

AIRCAST A60  
Sprunggelenksorthese

### Positionsnummer

34231 122  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

### Wirkungsweise/Aufbau

- Vorbeugung von Umknicktraumen durch distal verbundene 60°-Winkel-Stabilisatoren
- Individuelle Einstellung der Supinations-/Pronationsbeschränkung durch unelastisches Zugband
- Keine Beeinträchtigung des Abrollvorganges
- Kaum auftragend und angenehm zu tragen durch extra-schlanke Bauweise und atmungsaktives Material
- Schnelles Anlegen durch nur einen Klettverschluss

| Größe | Schuhgröße | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|-------|------------|-------------------|--------------------|
| S     | 35–38      | 02TSL-DE          | 02TSR-DE           |
| M     | 39–42      | 02TML-DE          | 02TMR-DE           |
| L     | 43–47      | 02TLL-DE          | 02TLR-DE           |

## DONJOY® MalleoForce®

Elastische Sprunggelenksbandage mit eingebauten Pelotten



### Wirkungsweise/Aufbau

- Zwei integrierte Silikonpelotten schützen und entlasten die Malleolen
- Optimale Passform durch anatomisch korrekten Beugewinkel
- Seitenuniversell

### Anwendungsgebiete

- Unterstützung und Kompression bei akuter und chronischer Knöchelverletzung
- Leichte Arthrose im Sprunggelenk
- Propriozeptive Stimulation durch Kompression
- Prävention von Verletzungen

### Rezeptierung


DONJOY MalleoForce  
Elastische Sprunggelenksbandage  
mit eingebauten Pelotten

### Positionsnummer

34205 087  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

P

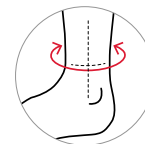

| Größe | Umfang   | Seite | Artikel-Nr. |
|-------|----------|-------|-------------|
| 1     | 17–19 cm | U     | 82-1754-1   |
| 2     | 19–21 cm | U     | 82-1754-2   |
| 3     | 21–23 cm | U     | 82-1754-3   |
| 4     | 23–25 cm | U     | 82-1754-4   |
| 5     | 25–27 cm | U     | 82-1754-5   |
| 6     | 27–29 cm | U     | 82-1754-6   |

## DONJOY® MalleoForce® Plus

Sprunggelenks-Führungs-Bandage



### Wirkungsweise/Aufbau

- Einstellbarer Gurt um Pro- oder Supinationsbewegungen zu reduzieren
- Optimale Passform durch anatomisch korrekten Beugewinkel
- Seitenuniversell

### Anwendungsgebiete

- Zur Stützung und Weichteilkompression bei akuten und chronischen Knöchelverletzungen
- Leichte Arthrose im Sprunggelenk
- Leichte (Grad I) Knöchelverstauchungen und -dehnungen (Distorsion)
- Leichte Knöchelinstabilität
- Prävention von Verletzungen

### Rezeptierung


DONJOY MalleoForce Plus  
Sprunggelenks-Führungs-Bandage

### Positionsnummer

34211 057  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

P

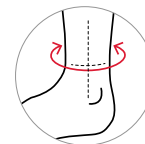

| Größe | Umfang   | Seite | Artikel-Nr. |
|-------|----------|-------|-------------|
| 1     | 17–19 cm | U     | 82-1755-1   |
| 2     | 19–21 cm | U     | 82-1755-2   |
| 3     | 21–23 cm | U     | 82-1755-3   |
| 4     | 23–25 cm | U     | 82-1755-4   |
| 5     | 25–27 cm | U     | 82-1755-5   |
| 6     | 27–29 cm | U     | 82-1755-6   |

## PROCARE® Remedy Pro™

Vorfuß-Entlastungs-Schuh



### Wirkungsweise/Aufbau

- Entlastung des Vorfußes
- 15°-Keilsohle zur Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Rückfuß
- Nahtlose, gepolsterte Ferse
- Weiches atmungsaktives Material
- Herausnehmbare Innensohle
- Breiter abnehmbarer Vorderverschluss
- Quadratisches Design zum Schutz der Zehen
- Seitenuniversell

### Anwendungsgebiete

- Entlastung des Vorfußes nach Operation oder Trauma
- Fußverletzungen konservativ und postoperativ
- Wunden im Vorfußbereich
- Diabetisches Fußsyndrom
- Gangrän

### Rezeptierung

PROCARE Remedy Pro  
Vorfußentlastungsschuh

### Positionsnummer

34161 045  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

| Größe | Schuhgröße | Artikel-Nr. |
|-------|------------|-------------|
| XS    | < 36       | 79-81722    |
| S     | 36–38      | 79-81723    |
| M     | 39–41      | 79-81725    |
| L     | 42–43      | 79-81727    |
| XL    | > 43       | 79-81728    |

## DR. COMFORT® Comfortschuhe

Überzeugend durch Funktionalität, Komfort und Style



### Pluspunkte

- 3 Weiten, besonders tief, extra leicht und soft
- Ideal für Einlagenversorgungen und Fußpatienten
- Komfortables Abrollverhalten, optimale Dämpfung
- Keine Vororder

### Größen und Maße

- Schuhe je nach Modell lieferbar in folgenden Größen:  
Damen: 36–42  
Herren: 40–48

Alle Modelle und ausführliche Produktinformationen finden Sie im Gesamtkatalog DR.COMFORT® sowie auf [www.enovis-medtech.at/produkte/orthopaedische-schuhe](http://www.enovis-medtech.at/produkte/orthopaedische-schuhe)

### ACTIVE LINE

Active Line – sportliche Comfortschuhe überraschend anders



Jack



Grace

### CASUAL LINE

CASUAL LINE – täglicher Comfort in stilvollen Casual-Schuhen



Ruth



Roger



Annie

### ORTHO LINE

Ortho Line – der Experten-Schuh



Spirit-X



Performance-X



Edward-X  
Extra weit aufklappbar

## DONJOY® Defiance®

Maßgefertigte Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/Flexionsbegrenzung



Defiance® Standard  
mit klassischem 4-wandigem  
Carbonfaserrahmen



Defiance® III  
mit geschwungenem  
4-wandigem Carbon-  
faserrahmen.  
Die Rahmenform ge-  
währt größere Freiheit  
im Oberschenkelbereich.

### Wirkungsweise/Aufbau

- Stabilisierung, einstellbare Limitierung der Bewegung und funktionelle Unterstützung der fehlenden Stabilität im Kniegelenk, zur Verhinderung der vorderen/hinteren Schublade
- Leichter, selbsttragender Carbonfaserrahmen
- Original DONJOY® 4-Punkt-Prinzip verhindert pathologische Hebelwirkung

- Physiologische Führung des Knies mit polyzentrischem Gelenk
- Flexionsbegrenzung bei 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° und Extensionsbegrenzung bei 0°, 10°, 20°, 30°, 40° möglich
- Reduzierung der Innenrotation und Begrenzung der Subluxation der Tibia (vordere oder hintere Schublade)
- Wahlweise mit kürzerem Unter- bzw. Oberschenkelrahmen und in vielen Farbvarianten erhältlich

### Anwendungsgebiete

- Stabilisierung und Schutz des Kniegelenks bei Instabilitäten oder nach Rekonstruktion
  - Nur des vorderen Kreuzbandes (ACL-Version)
  - Nur des hinteren Kreuzbandes (PCL-Version)
  - Des vorderen und hinteren Kreuzbandes gleichzeitig (CI-Version)
- Verstauchungen und Defekte der Seitenbänder

### Rezeptierung

DONJOY Defiance  
Maßorthese

|                     | Mindestmaß | Höchstmaß |
|---------------------|------------|-----------|
| Oberschenkelumfang  | 32 cm      | 97 cm     |
| Unterschenkelumfang | 26 cm      | 67 cm     |



## DONJOY® Defiance® Farbkarte

gilt für Defiance (Seite 52/53) und Defiance OA (Seite 82/83)

### Metallicfarben



Metallic Black Gloss



Metallic Gunmetal Gloss



Metallic Silver Gloss



Metallic White Gloss



Metallic Bright Blue Gloss



Metallic Navy Gloss



Metallic Forest Gloss



Metallic Gold Gloss



Metallic True Red Gloss

### Grundfarben



Black Gloss



Black Matte



Smoke Matte



White Gloss



Bright Blue Gloss



Navy Gloss



Powder Gloss



Seafoam Gloss



Emerald Gloss



Volt Gloss



Bumble Gloss



Safety Gloss



True Red Gloss



Fuchsia Gloss



Cotton Candy Gloss



Crimson Gloss



Grape Gloss



Velvet Gloss



Olive Drab Green Matte



Desert Tan Matte



Flat Dark Earth Matte

### Zweifarbzig



Beispiel



Beispiel

Alle Farben sind kombinierbar.

Farbübergang (siehe Beispiele) ist möglich, außer Matte-Farben.

Drucktechnisch können Farbabweichungen auftauchen.

## DONJOY® 4Titide®

Knie – Bewegungs – Orthesen mit einstellbarem Bewegungsumfang bei vorderer/hinterer Instabilität (ACL,PCL)



4TITIDE® CI-Version



4Titide®  
ACL-Version



4Titide®  
PCL-Version

### Wirkungsweise/Aufbau

- Stabilisierung, einstellbare Limitierung der Bewegung und funktionelle Unterstützung der fehlenden Stabilität im Kniegelenk, zur Verhinderung der vorderen/hinteren Schublade
- Original DONJOY® 4-Punkt-Prinzip verhindert pathologische Hebelwirkung
- Physiologische Führung des Knies mit polyzentrischem Gelenk
- Flexionsbegrenzung bei 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° und Extensionsbegrenzung bei 0°, 10°, 20°, 30° 40° möglich
- Reduzierung der Innenrotation und Begrenzung der Subluxation der Tibia (vordere oder hintere Schublade)

- Anatomisch vorgeformter, verwindungssteifer Flachrahmen aus Flugzeug-Aluminium
- Selbsttragende, leichte Rahmenkonstruktion
- Leicht an die individuelle Beinkontur anformbar

### Anwendungsgebiete

- Stabilisierung und Schutz des Kniegelenks bei Instabilitäten oder nach Rekonstruktion
  - Nur des vorderen Kreuzbandes (ACL-Version)
  - Nur des hinteren Kreuzbandes (PCL-Version)
  - Des vorderen und hinteren Kreuzbandes gleichzeitig (CI-Version)
- Instabilitäten und Verstauchungen der Seitenbänder
- Sanfter Schutz einer Extremität oder eines Körpersegments für die Akut- und Prophylaxeversorgung.

### Rezeptierung

DONJOY 4Titide®  
Knieorthese (ACL, PCL oder CI)

### Positionsnummer

ACL 34641 028  
10% Selbstbehalt  
PCL 34641 071  
10% Selbstbehalt  
CI 34641 064  
10% Selbstbehalt

### Facharzttrichtung

F

| Größe  | Version | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|--------|---------|-------------------|--------------------|
| XS–3XL | ACL     | 11-0831-x-DE      | 11-0830-x-DE       |
| XS–3XL | PCL     | 11-0833-x-DE      | 11-0832-x-DE       |
| XS–3XL | CI      | 11-0835-x-DE      | 11-0834-x-DE       |

x = siehe Größentabelle Seite 81

## DONJOY® Armor

Knie – Bewegungs – Orthesen mit einstellbarem Bewegungsumfang bei vorderer/hinterer Instabilität (ACL,PCL)



### Wirkungsweise/Aufbau

- Abgeschrägter Oberschenkelrahmen für bessere Passform und die Möglichkeit zu beidseitiger Versorgung
- Kurzer Unterschenkelrahmen
- Besonders robuste Konstruktion für hohe Belastungen
- Original DONJOY® 4-Punkt-Prinzip: verhindert pathologische Hebelwirkung

- Reduziert Innenrotation, begrenzt Subluxation der Tibia (vordere oder hintere Schublade), stabilisiert das Kniegelenk in der Sagittalebene
- Anatomisch vorgeformte, verwindungssteife Rahmengemetrie
- Flexionsbegrenzung bei 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° und Extensionsbegrenzung bei 0°, 10°, 20°, 30°, 40° möglich
- Extensionsbegrenzung 10° werksseitig vorinstalliert

### Anwendungsgebiete

- Stabilisierung und Schutz des Kniegelenks bei Instabilitäten oder nach Rekonstruktion
  - Nur des vorderen Kreuzbandes (ACL-Version)
  - Nur des hinteren Kreuzbandes (PCL-Version)
  - Des vorderen und hinteren Kreuzbandes gleichzeitig (CI-Version)
- Instabilitäten und Verstauchungen der Seitenbänder
- Sanfter Schutz einer Extremität oder eines Körpersegments für die Akut- und Prophylaxeversorgung.

### Rezeptierung

DONJOY Armor Knieorthese (CI)

### Positionsnummer

CI 34641 066  
10% Selbstbehalt

### Facharztrichtung

F

| Größe  | Version | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|--------|---------|-------------------|--------------------|
| XS–3XL | CI      | 11-1030-x-26000   | 11-1029-x-26000    |

x = siehe Größentabelle Seite 81

## DONJOY® Fullforce™

Knie – Bewegungs – Orthesen mit einstellbarem Bewegungsumfang bei vorderer/hinterer Instabilität (ACL,PCL)



### Wirkungsweise/Aufbau

- Stabilisierung, einstellbare Limitierung der Bewegung und funktionelle Unterstützung der fehlenden Stabilität im Kniegelenk, zur Verhinderung der vorderen/hinteren Schublade
- Original DONJOY® 4-Punkt-Prinzip verhindert pathologische Hebelwirkung
- Physiologische Führung des Knies mit extra flachem polyzentrischen FourcePoint™-Gelenk
- Extensionsdämpfung ein-/ausschaltbar, Dämpfungsstärke in 3 Stufen wählbar
- Signifikant verbesserter postoperativer Schutz
- Flexionsbegrenzung bei 45°, 60°, 75°, 90° und Extensionsbegrenzung bei 0°, 10° mit beiliegenden Keilen möglich, weitere Keile optional erhältlich

- Reduzierung der Innenrotation und Begrenzung der Subluxation der Tibia (vordere oder hintere Schublade)
- Anatomisch vorgeformter, verwindungssteifer Flachrahmen aus Flugzeug-Aluminium in Carbon-Optik
- Leichte, selbsttragende Konstruktion mit komfortabel abgeschrägtem Oberschenkelrahmen

### Anwendungsgebiete

Stabilisierung und Schutz des Kniegelenks bei

- Verletzungen des vorderen Kreuzbandes
- Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes
- Seitenbandinstabilitäten
- Sanfter Schutz einer Extremität oder eines Körpersegments für die Akut- und Prophylaxeversorgung.

### Rezeptierung

DONJOY Fullforce  
Knieorthese (CI)

### Positionsnummer

CI 34641 078  
10% Selbstbehalt

### Facharztrichtung

F

| Größe  | Version     | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|--------|-------------|-------------------|--------------------|
| XS–3XL | CI Standard | 11-0265-x-DE      | 11-0264-x-DE       |

x = siehe Größentabelle Seite 81

## DONJOY® 4Titude® Advanced

Knie – Bewegungs – Orthesen mit einstellbarem Bewegungsumfang bei vorderer/hinterer Instabilität (ACL,PCL)



### Wirkungsweise/Aufbau

- Stabilisierung, einstellbare Limitierung der Bewegung und funktionelle Unterstützung der fehlenden Stabilität im Kniegelenk, zur Verhinderung der vorderen/hinteren Schublade
- Original DONJOY® 4-Punkt-Prinzip verhindert pathologische Hebelwirkung
- Physiologische Führung des Knies mit polyzentrischem Gelenk
- Flexionsbegrenzung bei 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° und Extensionsbegrenzung bei 0°, 10°, 20°, 30° 40° möglich
- Reduzierung der Innenrotation und Begrenzung der Subluxation der Tibia (vordere oder hintere Schublade)
- Anatomisch vorgeformter, verwindungssteifer Flachrahmen aus Flugzeug-Aluminium

- Selbsttragende, leichte Rahmenkonstruktion mit komfortabel abgescrängtem Oberschenkelrahmen
- Leicht an die individuelle Beinkontur anformbar
- Klappbare Gurtösen, flache Gurtführung und gummierte Gurtlaschen erleichtern das Anlegen der Orthese
- Schienbeinpolster mit Fenster nimmt Druck von der Patellasehne

### Anwendungsgebiete

- Stabilisierung und Schutz des Kniegelenks bei Instabilitäten oder nach Rekonstruktion
  - Nur des vorderen Kreuzbandes
  - Des vorderen und hinteren Kreuzbandes gleichzeitig
- Instabilitäten und Verstauchungen der Seitenbänder
- Sanfter Schutz einer Extremität oder eines Körpersegments für die Akut- und Prophylaxeversorgung.

### Rezeptierung

DONJOY 4Titude Advanced  
(ACL oder CI)

### Positionsnummer

ACL 34641 097  
10% Selbstbehalt  
CI 34641 098  
10% Selbstbehalt

### Facharztrichtung

F

| Größe  | Version | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|--------|---------|-------------------|--------------------|
| XS–3XL | ACL     | 11-0844-x-DE      | 11-0843-x-DE       |
| XS–3XL | CI      | 11-0848-x-DE      | 11-0847-x-DE       |

x = siehe Größentabelle Seite 81

## ORMED® Artrocare® Pro3

Knie – Bewegungs – Orthesen mit einstellbarem Bewegungsumfang bei vorderer/hinterer Instabilität (ACL,PCL)



### Wirkungsweise/Aufbau

- Stabilisierung, einstellbare Limitierung der Bewegung und funktionelle Unterstützung der fehlenden Stabilität im Kniegelenk, zur Verhinderung der vorderen/hinteren Schublade
- Einfache und sichere Handhabung durch simples Auflegen der Orthese von vorn
- Physiologische Führung des Knies mit polyzentrischem Gelenk
- Flexionsbegrenzung bei 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° und Extensionsbegrenzung bei 0°, 10°, 20°, 30° 40° möglich
- Anatomisch vorgeformter, verwindungssteifer Flachrahmen aus Flugzeug-Aluminium
- Selbsttragende, konifizierte Rahmenkonstruktion für hohe Seitenstabilität und Rotationssicherheit

- Stufenlos einstellbare, unelastische Klettgurte
- Leicht an die individuelle Beinform anpassbar

### Anwendungsgebiete

Stabilisierung und Schutz des Kniegelenks bei

- Verletzungen oder Instabilitäten des vorderen Kreuzbandes
- Seitenbanddefekten
- Schwerer Kniegelenksinstabilität
- Meniskusverletzungen

### Rezeptierung

ORMED Artrocare Pro3  
Knieorthese

### Positionsnummer

CI 34641 077  
10% Selbstbehalt

### Facharzttrichtung

F


| Größe  | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|--------|-------------------|--------------------|
| XS–3XL | 11-1624-x-DE      | 11-1625-x-DE       |

x = siehe Größentabelle

### Größentabelle

| Größe x | Umfang*  |
|---------|----------|
| 1 = XS  | 30–33 cm |
| 2 = S   | 33–35 cm |
| 3 = M   | 35–38 cm |
| 4 = L   | 38–43 cm |
| 5 = XL  | 43–48 cm |
| 6 = XXL | 48–53 cm |
| 7 = 3XL | 53–58 cm |

\* Knieumfang Patellamitte bei gestrecktem Knie

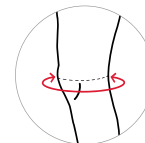

## DONJOY® PM II Wrap Long

Knieorthese mit einstellbaren Mehrachsgelenkschienen, lang



### Wirkungsweise/Aufbau

- „Wraparound“-Verschluss für einfaches Anlegen von hinten
- Sowohl mediale als auch laterale Stabilisierung des Kniegelenks durch lange Gelenkschienen
- Werkzeuglose Einstellung der polyzentrischen Gelenke:  
Extension: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°, Flexion: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°
- Individuell einstellbare Klettverschlüsse
- Atmungsaktives Netzmaterial und griffige Gurtaschen
- Elastisches Material für Kompression und Propriozeption

### Anwendungsgebiete

Die DONJOY® PM II Wrap (Lang) dient als Stütze und zur Schmerzlinderung nach Verletzungen wie:

- Leichte bis mittlere MCL- und/oder LCL-Verstauchungen
- Leichte bis mittlere VKB- und/oder PCL-Instabilitäten
- Meniskusreparaturen

Sanfter Schutz einer Extremität oder eines Körpersegments für die Akut- und Prophylaxeversorgung.

**Rezeptierung** DONJOY PM II Wrap Long

**Positionsnummer** 34621 075  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €


**Facharzttrichtung** F

| Größe   | Seite | Artikel-Nr. |
|---------|-------|-------------|
| XS-XXXL | U     | 82-0039-x   |

### Größentabelle

| Größe x  | Umfang*  |
|----------|----------|
| 1 = XS   | 33–39 cm |
| 2 = S    | 39–47 cm |
| 3 = M    | 47–53 cm |
| 4 = L    | 53–60 cm |
| 5 = XL   | 60–67 cm |
| 6 = XXL  | 67–75 cm |
| 7 = XXXL | 75–83 cm |

\* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

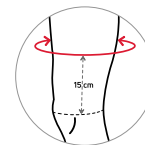

# DONJOY® GenuForce®

Bandage mit Pelotte und seitlichen Verstärkungen



## Wirkungsweise/Aufbau

- Rutschsicherer Halt durch Silikonhaftband
- Kniescheibenpelotte für zusätzliche Stabilisierung und Friktion
- Komfortzone in der Kniekehle für ein angenehmes Tragegefühl
- Seitenuniversell

## Anwendungsgebiete


- Unterstützung und Kompression bei akuter und chronischer Knieverletzung
- Leichte Arthrose im Knie
- Propriozeptive Stimulation durch Kompression
- Patellofemorale Schmerzen (Knieschmerzen)
- Leichte Knieinstabilität
- Prävention von Verletzungen

## Rezeptierung

DONJOY GenuForce  
Bandage mit Pelotte und seitlichen Verstärkungen

## Positionsnummer

34603 149  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

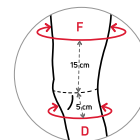

## Facharzttrichtung P

| Größe          | Umfang F | Umfang D | Seite | Artikel-Nr. |
|----------------|----------|----------|-------|-------------|
| Standardgrößen |          |          |       |             |
| 1              | 37–40 cm | 25–28 cm | U     | 82-1750-1   |
| 2              | 40–43 cm | 28–31 cm | U     | 82-1750-2   |
| 3              | 43–46 cm | 31–34 cm | U     | 82-1750-3   |
| 4              | 46–49 cm | 34–37 cm | U     | 82-1750-4   |
| 5              | 49–52 cm | 37–40 cm | U     | 82-1750-5   |
| 6              | 52–55 cm | 40–43 cm | U     | 82-1750-6   |
| 7              | 55–58 cm | 43–46 cm | U     | 82-1750-7   |
| Plusgrößen     |          |          |       |             |
| 5+             | 52–55 cm | 37–40 cm | U     | 82-1751-5   |
| 6+             | 55–58 cm | 40–43 cm | U     | 82-1751-6   |
| 7+             | 58–62 cm | 43–46 cm | U     | 82-1751-7   |
| 8+             | 62–65 cm | 46–49 cm | U     | 82-1751-8   |



## DONJOY® GenuForce® XPert

Knie-Bandage mit Gelenk- und Überstreckungsschutz



### Wirkungsweise/Aufbau

- Anpassbare und abnehmbare Gurte
- Kniescheibenpelotte für zusätzliche Stabilisierung und Friktion
- Polyzentrische Gelenkschienen für mehr Stabilität: ohne Extensions-/Flexionsbegrenzung
- Komfortzone in der Kniekehle für ein angenehmes Tragegefühl

### Anwendungsgebiete


- Unterstützung und Kompression bei akuter und chronischer Knieverletzung
- Leichte Arthrose im Knie
- Propriozeptive Stimulation durch Kompression
- Leichte bis mittelschwere Zerrungen von Bändern
- Leichte bis mittelschwere Knieinstabilität
- Leichte Verletzungen des Meniskus

### Rezeptierung

DONJOY GenuForce XPert  
Knie-Bandage mit Gelenk-  
und Überstreckungsschutz

### Positionsnummer

34613 096  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

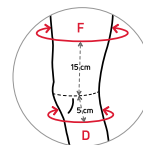

### Facharztrichtung

P

| Größe          | Umfang F | Umfang D | Seite | Artikel-Nr. |
|----------------|----------|----------|-------|-------------|
| Standardgrößen |          |          |       |             |
| 1              | 37–40 cm | 25–28 cm | U     | 82-1753-1   |
| 2              | 40–43 cm | 28–31 cm | U     | 82-1753-2   |
| 3              | 43–46 cm | 31–34 cm | U     | 82-1753-3   |
| 4              | 46–49 cm | 34–37 cm | U     | 82-1753-4   |
| 5              | 49–52 cm | 37–40 cm | U     | 82-1753-5   |
| 6              | 52–55 cm | 40–43 cm | U     | 82-1753-6   |
| 7              | 55–58 cm | 43–46 cm | U     | 82-1753-7   |

## DONJOY® Support Everest Ice II

Knie – Bandage mit einstellbaren Mehrachsgelenk – Schienen, lang



### Wirkungsweise/Aufbau

- Innovative 3-in-1 Lösung: Kniestabilisierung mit optionaler Kühlung und Kompression
- Mediale und laterale Stabilisierung des Kniegelenks durch lange Gelenkschienen
- Werkzeuglose Einstellung der polyzentrischen Gelenke:  
Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 60°, 90°, Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 60°, 90°
- Individuell einstellbare Klett- und Klickverschlüsse
- abnehmbare dorsale Stütze

### Anwendungsgebiete

Zur Verwendung

- nach Verletzungen,
- vor und nach Operationen,
- bei funktioneller Physiotherapie
- bei Wiederaufnahme von körperlicher Betätigung
- Leichte bis mäßige ACL/PCL-Verletzungen,
- mäßige bis schwere Seitenbandverletzungen (MCL, LCL),
- Meniskusverletzungen,
- Knieoperationen

### Rezeptierung

DONJOY Support Everest Ice II

### Positionsnummer

34621 082

Selbstbehalt mindestens 43,00 €


### Facharztrichtung

F

| Größe  | Seite | Artikel-Nr. |
|--------|-------|-------------|
| XS-XXL | U     | 82-0045-x   |

### Größentabelle

| Größe x | Umfang*  |
|---------|----------|
| 1 = XS  | 33–37 cm |
| 2 = S   | 38–43 cm |
| 3 = M   | 44–49 cm |
| 4 = L   | 50–55 cm |
| 5 = XL  | 56–60 cm |
| 6 = XXL | > 60 cm  |

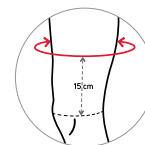

\* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

# PROCARE® Kneeranger® II Universal

Knie – Lagerungs – Bandage mit Gelenk



## Wirkungsweise/Aufbau

- Stabilisierung und Führung zur Mobilisierung
- Polyzentrische Gelenke mit einstellbarer Bewegungsbegrenzung:  
Flexionsbegrenzung bei 0°, 15°, 30°, 60°, 90° und Extensionsbegrenzung  
bei 0°, 15°, 30°, 60°, 90° möglich

## Anwendungsgebiete

Stabilisierung und Immobilisierung des Knies nach Knie- oder Weichteilverletzungen

## Rezeptierung

PROCARE Kneeranger II Universal  
Knieorthese

## Positionsnummer

34721 018  
rückverrechnungsfähig beim jeweiligen  
Sozialversicherungsträger

## Facharztrichtung

F

| Version | Orthesenlänge | Seite | Artikel-Nr. |
|---------|---------------|-------|-------------|
| kurz    | 43 cm         | U     | 79-94230    |
| lang    | 66 cm         | U     | 79-94240    |

## DONJOY® Reaction™ Web OA

Kniebandage mit Mehrachsgelenk und erhöhten Stabilisierungseffekten gegen Varus-Valgus



### Wirkungsweise/Aufbau

- 3-Punkt-Entlastungsorthese bei Gonarthrose (Varus-Valgus)
- Seitliche Gelenkschiene mit Soft-Kondylenpolster ist entsprechend dem erforderlichen individuellen Entlastungswinkel anstränkbar
- Elastisches Silikonnetz an der Vorderseite wirkt stoßdämpfend
- Unelastisches Rückenteil mit breiten Klettbindern
- Rutschhemmende Polster an Knie, Ober- und Unterschenkel
- Dünner Unterziehstrumpf ist beiliegend

### Anwendungsgebiete

- Zur Stützung des Kniegelenks
- Bei leichter bis mäßiger Gonarthrose zur Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments

### Rezeptierung


DONJOY Reaction Web OA  
Kniebandage mit Mehrachsgelenk und erhöhten Stabilisierungseffekten gegen Varus-Valgus

### Positionsnummer

34625 017  
Selbstbehalt  
mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F/CH

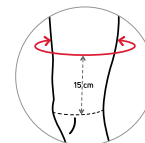

| Größe | Umfang*  | Art.-Nr.                      |                               |
|-------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
|       |          | rechts medial / links lateral | links medial / rechts lateral |
| XS    | 33–39 cm | 11-7426-1                     | 11-7427-1                     |
| S     | 39–47 cm | 11-7426-2                     | 11-7427-2                     |
| M     | 47–53 cm | 11-7426-3                     | 11-7427-3                     |
| L     | 53–60 cm | 11-7426-4                     | 11-7427-4                     |
| XL    | 60–67 cm | 11-7426-5                     | 11-7427-5                     |
| XXL   | 67–75 cm | 11-7426-6                     | 11-7427-6                     |
| XXXL  | 75–81 cm | 11-7426-7                     | 11-7427-7                     |

\* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

## DONJOY® OA GO

3-Punkt-Entlastungssorthese gegen varus oder valgus



\* Die Marke BOA® ist das Eigentum der Boa Technology, Inc.

### Wirkungsweise/Aufbau

- Flache Bauweise und geringes Gewicht zur Unterstützung von Aktivität
- Zwei leicht einstellbare, voneinander unabhängige BOA®-Drehverschlüsse zur Entlastung
- Flexible Manschetten für optimale Druckverteilung und anatomische Passform
- Entlastung durch Druck im 3-Punkt-Entlastungssystem
- Orthesengelenk sitzt nicht am betroffenen Kompartiment

### Anwendungsgebiete

- Leichte bis mittelschwere unikompartmentelle Gonarthrose
- Allgemeine Instabilität des Kniegelenks
- Varus-Valgus-Entlastung unikompartmentell

### Rezeptierung

DONJOY OA GO  
3-Punkt-Entlastungssorthese gegen varus oder valgus

### Positionsnummer

34750 033  
Selbstbehalt mindestens 43,00€

### Facharzttrichtung

F/CH


| Größe  | Version                      | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|--------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| XS-XXL | lateral<br>(lat. Entlastung) | 82-7428-x         | 82-7429-x          |
| XS-XXL | medial<br>(med. Entlastung)  | 82-7429-x         | 82-7428-x          |

x = siehe Größentabelle

### Größentabelle

| Größe x | Umfang*  |
|---------|----------|
| 1 = XS  | 33–39 cm |
| 2 = S   | 39–47 cm |
| 3 = M   | 47–53 cm |
| 4 = L   | 53–60 cm |
| 5 = XL  | 60–67 cm |
| 6 = XXL | 67–75 cm |

\* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

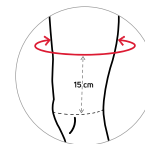

## DONJOY® OA Nano™

3-Punkt-Entlastungsorthese gegen varus oder valgus



### Wirkungsweise/Aufbau

- Federleichter Flachrahmen aus Magnesium, flache Gelenke und flache Gurtführung
- 3-Punkt-Hebelwirkung durch formstabile Rahmenteile aus Nano MAG™ mit biaxialen Gelenken
- Auch bei Bandinstabilitäten einsetzbar durch original DONJOY® 4-Punkt-Prinzip
- Einstellung des genauen Varus-/Valgus-Entlastungswinkels möglich
- Effektive Entlastung des belasteten Kompartiments auch in der Beugung
- Antimigrations-Band gegen Verrutschen
- Flexionsbegrenzung bei 60°, 75°, 90° und Extensionsbegrenzung bei 20°, 30°, 45° möglich"

### Anwendungsgebiete

- Bei Gonarthrose zur Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments, auch in Verbindung mit Bandinstabilitäten
- Zur Schmerzlinderung

### Rezeptierung

DONJOY OA Nano  
3-Punkt-Entlastungsorthese  
gegen varus oder valgus

### Positionsnummer

34750 033  
10% Selbstbehalt

### Facharzttrichtung

F/CH


| Größe  | Version                      | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|--------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| XS–3XL | lateral<br>(lat. Entlastung) | 11-1217-x         | 11-1216-x          |
| XS–3XL | medial<br>(med. Entlastung)  | 11-1215-x         | 11-1214-x          |

x = siehe Größentabelle

### Größentabelle

| Größe x | Umfang*  |
|---------|----------|
| 1 = XS  | 33–39 cm |
| 2 = S   | 39–47 cm |
| 3 = M   | 47–53 cm |
| 4 = L   | 53–60 cm |
| 5 = XL  | 60–67 cm |
| 6 = XXL | 67–75 cm |
| 7 = 3XL | 75–81 cm |

\* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

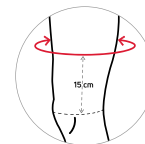

## DONJOY® OA Adjuster 3

3-Punkt-Entlastungssorthese gegen varus oder valgus



### Wirkungsweise/Aufbau

- Stabiler Flachrahmen aus Aluminium mit polyzentrischen Gelenken zur physiologischen Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Hebelarme aus innovativem leichten Nano MAG™ (Magnesium) sichern die wirksame Entlastung nach dem 3-Punkt-Prinzip
- Stufenlose Einstellung des individuellen Varus-/Valgusentlastungswinkels möglich
- Limitierbarer Bewegungsumfang in Flexion bei 60°, 75° und Extension bei 10°, 20°, 30°, 45° wirkt unzuträglichen Gelenkbewegungen entgegen (Keile sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf können diese bestellt werden.)

### Anwendungsgebiete

- Bei Gonarthrose zur Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments, auch in Verbindung mit Bandinstabilitäten
- Schmerzlinderung

### Rezeptierung

DONJOY OA ADJUSTER 3  
3-Punkt-Entlastungssorthese gegen varus oder valgus

### Positionsnummer

34750 033  
10% Selbstbehalt

### Facharzttrichtung

F/CH


| Größe  | Version                      | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|--------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| XS–3XL | lateral<br>(lat. Entlastung) | 11-1593-x         | 11-1592-x          |
| XS–3XL | medial<br>(med. Entlastung)  | 11-1591-x         | 11-1590-x          |

x = siehe Größentabelle

### Größentabelle

| Größe x | Umfang*  |
|---------|----------|
| 1 = XS  | 33–39 cm |
| 2 = S   | 39–47 cm |
| 3 = M   | 47–53 cm |
| 4 = L   | 53–60 cm |
| 5 = XL  | 60–67 cm |
| 6 = XXL | 67–75 cm |
| 7 = 3XL | 75–81 cm |

\* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

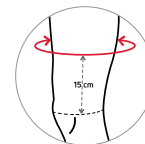

## DONJOY® Defiance® OA

Maßorthese bei Gonarthrose



### Wirkungsweise/Aufbau

- Leichter Carbonfaserrahmen
- Entlastung eines Kompartiments nach dem 3-Punkt-Prinzip
- Individueller Varus- oder Valgusentlastungswinkel wird bei Maßfertigung berücksichtigt
- Zusätzliche Varus-/Valgusentlastung über einstellbares Kondylenpolster

- 4-Punkt-Prinzip verhindert pathologische Hebelwirkung
- Physiologische Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Polyzentrische Gelenke mit limitierbarem Bewegungsumfang in Extension und Flexion

### Anwendungsgebiete

Die DONJOY® Adjustable OA (Defiance ACL, PCL, CI) Kniegelenkorthese wurde

- zur Stützung des Knies entwickelt.
- Die Orthese kann für Personen geeignet sein, die unter unikompartimenteller Kniearthrose leiden.
- Textilmaterial/halbsteif, um Bewegungen durch eine elastische oder halbsteife Konstruktion einzuschränken.

### Rezeptierung

DONJOY Defiance OA  
Maßorthese

|                     | Mindestmaß | Höchstmaß |
|---------------------|------------|-----------|
| Oberschenkelumfang  | 32 cm      | 97 cm     |
| Unterschenkelumfang | 26 cm      | 67 cm     |

Bitte separates Maßblatt benutzen



## DONJOY® Immo 3V

Knie-Ruhigstellungsorthese,  
gestreckt oder gebeugt (0° oder 20°)



### Wirkungsweise/Aufbau

- Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° oder 20°
- Individuelle Anpassung an den Beinumfang (one size fits all)
- In vier gängigen Längen erhältlich
- Anformbare Stabilisierungselemente medial, lateral und dorsal
- Individuell zuschneidbare Klettverschlüsse erleichtern die Handhabung

### Anwendungsgebiete

- Stabilisierung und Ruhigstellung des Kniegelenks
- Knie- oder Weichteilverletzungen
- Immobilisierung der Extremität oder des Körpersegments

### Rezeptierung

DONJOY Immo 3V (0° oder 20°)


### Positionsnummer

0° 34722 086  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

20° 34723 055  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharzttrichtung

F

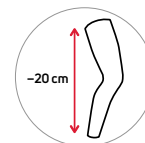


| Orthesenlänge* | Seite | Artikel-Nr. |             |
|----------------|-------|-------------|-------------|
|                |       | Version 0°  | Version 20° |
| 40 cm          | U     | 82-96105    | 82-96125    |
| 50 cm          | U     | 82-96106    | 82-96126    |
| 60 cm          | U     | 82-96107    | 82-96127    |
| 65 cm          | U     | 82-96108    | 82-96128    |


\*Richtwert: Orthesenlänge = Beinlänge medial – 20 cm

# ORMED® Newport® 3


Hüft-Stabilisierungs-Orthese mit Abduktion

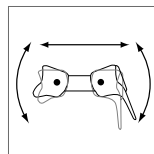

Beckenschale  
wahlweise für links  
oder rechts

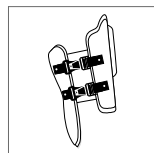

Oberschenkel-  
schale zirkulär

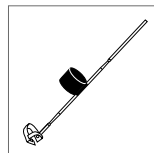

Antirotations-  
komponente

## Wirkungsweise/Aufbau

- Einstellbare Bewegungsbegrenzung in zwei Ebenen
- Fix-Lock-Verschlüsse für schnelles An- und Ablegen
- Thermoplastisch verformbare Schalenkomponenten
- Wahlweise mit Antirotationskomponente

## Anwendungsgebiete

- Funktionssicherung/Mobilisierung postoperativ/konservativ
- Zustand nach Hüftgelenksluxation, Implantatslockerung, TEP-Hüfteingriff und Revisionshüfteingriff, Hüftkopfresektion (Girdlestone-Hüfte)
- Umstellungsosteotomie, frühfunktionelle Bewegungstherapie und Luxationsprophylaxe, Instabilität des Hüftgelenks, mittelschwere bis schwere Cox-Arthrose

## Rezeptierung

ORMED Newport 3 Hüftsystem

## Positionsnummer

35130 013  
10% Selbstbehalt

## Facharztrichtung

F

Newport® 3 Beckenschale

| Größe | Hüftumfang | Taillenumfang | Art.-Nr. rechts | Art.-Nr. links |
|-------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| S     | 66–81 cm   | 56–71 cm      | NP3BSSR         | NP3BSSL        |
| M     | 81–96 cm   | 71–86 cm      | NP3BSMR         | NP3BSML        |
| L     | 96–112 cm  | 86–102 cm     | NP3BSLR         | NP3BSLL        |
| XL    | 112–127 cm | 102–117 cm    | NP3BSXLR        | NP3BSXLL       |

Newport® 3 Oberschenkelschale

| Größe | Umfang<br>Oberschenkel<br>proximal | Umfang<br>Oberschenkel<br>distal | Art.-Nr. rechts | Art.-Nr. links |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| S     | 43–53 cm                           | 33–41 cm                         | NP3OSSR         | NP3OSSL        |
| M     | 51–61 cm                           | 38–46 cm                         | NP3OSMR         | NP3OSML        |
| L     | 58–69 cm                           | 43–51 cm                         | NP3OSLR         | NP3OSLL        |
| XL    | 66–76 cm                           | 48–56 cm                         | NP3OSXLR        | NP3OSXLL       |

Bestellung als Set-Artikel (Beckenschale, Oberschenkelschale und Hüftgelenk)  
oder als Einzelkomponente möglich.

| Zubehör                                   | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------|-------------|
| Antirotationskomponente                   | NP3ARC*     |
| Virtual® 5 Hüftgelenk für Newport® 3      | NP3GEL      |
| Virtual® 5 lang Hüftgelenk für Newport® 3 | NP3GEL-L    |

\* siehe aktuelle Preisliste

## DONJOY® LumboForce® 1

Rücken-Bandage kurz (bis 24 cm)



Eingeklettete  
Rückenpelotte

### Wirkungsweise/Aufbau

- Schlank und unauffällig
- Leichtes und innovatives Produktdesign
- Frontverschluss mit Mikrolett und Handeinschub erleichtert das Anlegen
- Herausnehmbare, dorsale Druckpelotte mit dynamischen Massage-Noppen

### Anwendungsgebiete

- Stabilisierung und Unterstützung der Lendenwirbelsäule
- Lumbalgie
- Osteochondrose
- Spondylarthrose

### Rezeptierung


DONJOY LumboForce 1  
Rücken-Bandage kurz (bis 24 cm)

### Positionsnummer

31400 130  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

P

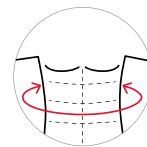

| Größe | Taillenumfang | Artikel-Nr.<br>Höhe: 23 cm dorsal / 16 cm ventral |
|-------|---------------|---------------------------------------------------|
| S     | 75–85 cm      | 82-0059-2                                         |
| M     | 85–95 cm      | 82-0059-3                                         |
| L     | 95–105 cm     | 82-0059-4                                         |
| XL    | 105–115 cm    | 82-0059-5                                         |
| XXL   | 115–125 cm    | 82-0059-6                                         |
| 3XL   | 125–135 cm    | 82-0059-7                                         |

## DONJOY® LumboForce® 2

Rücken-Stütz-Bandage kurz (bis 24 cm)



Eingeklettete  
Rückenpelotte

### Wirkungsweise/Aufbau

- Leichtes und innovatives Produktdesign
- Frontverschluss mit Mikrolett und Handeinschub erleichtert das Anlegen
- Leichtgängiger Zuggurt steigert die Kompression
- Herausnehmbare, dorsale Druckpelotte mit dynamischen Massage-Noppen
- Höhenverstellbares Rückenpad

### Anwendungsgebiete

- Stabilisierung und Unterstützung der Lendenwirbelsäule
- Akute und chronische Schmerzen
- Lumbalgie
- Osteochondrose
- Spondylarthrose

### Rezeptierung


DONJOY LumboForce 2  
Rücken-Stütz-Bandage kurz (bis 24 cm)

### Positionsnummer

31410 090  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

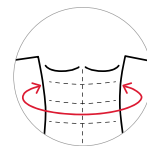

| Größe | Taillenumfang | Artikel-Nr.<br>Höhe: 26 cm dorsal / 16 cm ventral |
|-------|---------------|---------------------------------------------------|
| S     | 75–85 cm      | 82-0060-2                                         |
| M     | 85–95 cm      | 82-0060-3                                         |
| L     | 95–105 cm     | 82-0060-4                                         |
| XL    | 105–115 cm    | 82-0060-5                                         |
| XXL   | 115–125 cm    | 82-0060-6                                         |
| 3XL   | 125–135 cm    | 82-0060-7                                         |

## DONJOY® LumboForce® 3

Rücken-Stütz-Mieder mittel (26 cm) / hoch (32 cm)



### Wirkungsweise/Aufbau

- Leichtes und innovatives Produktdesign
- Frontverschluss mit Mikroklett und Handeinschub erleichtert das Anlegen
- Leichtgängige Zuggurte steigern die Kompression
- Herausnehmbare dorsale Stäbe zur Abrüstung der Orthese
- Zwei Rückenhöhen: 26 cm und 32 cm

### Anwendungsgebiete

- Stabilisierung und Unterstützung der Lendenwirbelsäule
- Bandscheibenprotrusion/-prolaps (konservativ und postoperativ)
- Spondylolisthese
- Facettensyndrom

### Rezeptierung


DONJOY LumboForce 3  
Rücken-Stütz-Mieder mittel (26 cm) /  
hoch (32 cm)

### Positionsnummer

31421 048  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

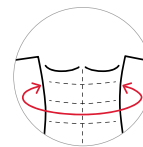

| Größe | Taillenumfang | Artikel-Nr.                          |                                      |
|-------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|       |               | Höhe: 26 cm dorsal,<br>16 cm ventral | Höhe: 32 cm dorsal,<br>19 cm ventral |
| S     | 75–85 cm      | 82-0061-2                            | –                                    |
| M     | 85–95 cm      | 82-0061-3                            | 82-0062-3                            |
| L     | 95–105 cm     | 82-0061-4                            | 82-0062-4                            |
| XL    | 105–115 cm    | 82-0061-5                            | 82-0062-5                            |
| XXL   | 115–125 cm    | 82-0061-6                            | 82-0062-6                            |
| 3XL   | 125–135 cm    | –                                    | 82-0062-7                            |

## DONJOY® LumboForce® 5

Flexions-Korsett



Eingeklettete  
Überbrückungs-  
schale

### Wirkungsweise/Aufbau

- Leichtes und innovatives Produktdesign
- Frontverschluss mit Mikroklett und Handeinschub erleichtert das Anlegen
- Leichtgängige Zuggurte + Flaschenzugsystem steigern die Kompression
- Die Überbrückungsschale sorgt für eine hohe Stabilität
- Herausnehmbare Überbrückungsschale zur Abrüstung der Orthese
- In zwei Höhen erhältlich

### Anwendungsgebiete

- Bandscheibenvorfall: Stadium 3 und 4
- Spondylolisthese
- Stabile Wirbelfrakturen der Lendenwirbelsäule
- Lumbale Spinalkanalstenose

### Rezeptierung


DONJOY LumboForce 5  
Flexions-Korsett

### Positionsnummer

31550 057  
10% Selbstbehalt

### Facharztrichtung

F

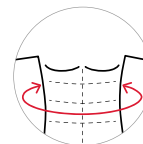

| Größe | Taillenumfang | Artikel-Nr.                            |                                        |
|-------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|       |               | Höhe:<br>26 cm dorsal<br>16 cm ventral | Höhe:<br>32 cm dorsal<br>19 cm ventral |
| S     | 75–85 cm      | 82-0065-2                              | –                                      |
| M     | 85–95 cm      | 82-0065-3                              | 82-0066-3                              |
| L     | 95–105 cm     | 82-0065-4                              | 82-0066-4                              |
| XL    | 105–115 cm    | 82-0065-5                              | 82-0066-5                              |
| XXL   | 115–125 cm    | 82-0065-6                              | 82-0066-6                              |
| 3XL   | 125–135 cm    | –                                      | 82-0066-7                              |

## DONJOY® Actistrap

Rückenstützbandage kurz (bis 24 cm)



Stufenlos einstellbare  
Zuggurte

### Wirkungsweise/Aufbau

- Extraleichte und luftdurchlässige Konstruktion
- Massierende Propriozeptionspelotte
- Dorsale Verstärkungsstäbe unterstützen die Entlastung
- Beidseitige elastische Zuggurte zur Einstellung der Kompressionsstärke
- Widerstandsfähiges, stark komprimierendes Material
- Einfaches Anlegen durch integrierte Handschlaufen

### Anwendungsgebiete

- Unterstützung der Lendenwirbelsäule
- Akute und chronische Schmerzen
- Beschwerden im unteren Rücken
- Leichte Lumboischialgie
- Entzündungen
- Osteochondrose
- Radikuläres, pseudoradikuläres Syndrom
- Spondylarthrose

### Rezeptierung


DONJOY Actistrap  
Rückenstützbandage kurz (bis 24 cm)

### Positionsnummer

31410 085  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

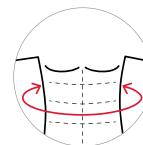

| Größe | Taillenumfang | Artikel-Nr.<br>Höhe: 26 cm dorsal |
|-------|---------------|-----------------------------------|
| XS    | 56–68 cm      | 82-0232-1                         |
| S     | 68–82 cm      | 82-0232-2                         |
| M     | 82–98 cm      | 82-0232-3                         |
| L     | 98–116 cm     | 82-0232-4                         |
| XL    | 116–136 cm    | 82-0232-5                         |

## DONJOY® OsteoStrap

Wirbelsäulenentlastungssorthese



Rückenschiene



Lendengurt

### Wirkungsweise/Aufbau

- Modulare Wirbelsäulenorthese für optimale Passform
- Anatomisch vorgeformte und individuell anpassbare Rückenschiene zur aktiven Entlastung der Brustwirbelsäule
- Aktive Aufrichtung, Entlastung und Stabilisierung der gesamten Wirbelsäule
- Schulter-Reklinationsgurte zur Korrektur der Kyphose
- Handschlaufen für einfaches Anlegen der Orthese
- Lendengurt stabilisiert und stützt die LWS
- Atmungsaktives Gewebe mit Carbon-Garn für maximalen Komfort

### Anwendungsgebiete

- DONJOY® OsteoStrap bietet Stützung, Stabilisierung sowie teilweise Immobilisierung (Einschränkung der Bewegung) der Wirbelsäule.
- Haltungsschäden im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit
- Traumatische Frakturen
- Osteoporose
- Stabile Wirbelfrakturen
- Osteoarthritis
- Dorsale Hyperkyphose
- Muskelschwäche




# DONJOY® OsteoStrap

Wirbelsäulenentlastungsorthese


DONJOY® OsteoStrap

| Größe | Taillenumfang | Rückenlänge<br>S1–C7 | Art.-Nr.   |
|-------|---------------|----------------------|------------|
| S1    | 68–82 cm      | 43–49 cm             | 82-0049-S1 |
| M1    | 82–98 cm      | 43–49 cm             | 82-0049-M1 |
| M2    | 82–98 cm      | 50–57 cm             | 82-0049-M2 |
| L2    | 98–116 cm     | 50–57 cm             | 82-0049-L2 |
| L3    | 98–116 cm     | 58–67 cm             | 82-0049-L3 |

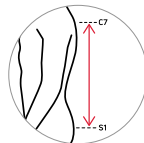

DONJOY® OsteoStrap Rückenschiene

| Größe | Rückenlänge<br>S1–C7 | Art.-Nr.  |
|-------|----------------------|-----------|
| 1     | 43–49 cm             | 82-0049-1 |
| 2     | 50–57 cm             | 82-0049-2 |
| 3     | 58–67 cm             | 82-0049-3 |

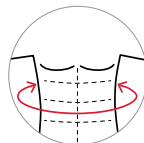

DONJOY® OsteoStrap Lendengurt

| Größe | Taillenumfang | Art.-Nr.   |
|-------|---------------|------------|
| XS    | 56–68 cm      | 82-0049-XS |
| S     | 68–82 cm      | 82-0049-S  |
| M     | 82–98 cm      | 82-0049-M  |
| L     | 98–116 cm     | 82-0049-L  |
| XL    | 116–136 cm    | 82-0049-XL |

Rezeptierung

DONJOY OsteoStrap  
Wirbelsäulenentlastungsorthese

Positionsnummer

31013 063  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

Facharztrichtung

F

# EMO Lumback Infinity Plus

Flexions-Korsett



Überbrückende Rückenschale

## Wirkungsweise/Aufbau

- Dünne, atmungsaktive Materialien
- Doppelter Flaschenzug für leichtes Schließen und höchste Kompression
- Kleiderschonender Mikroklett
- In zwei Höhen erhältlich
- Anatomisch geformte Überbrückungspelotte, die zur funktionellen Mobilisierung der LWS im Therapieverlauf abgerüstet werden kann
- Das Produkt kann dann als Lumbalstützorthese weiter genutzt werden

## Anwendungsgebiete

- Schwere Lumboischialgie
- Schweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom
- Erhebliche Bandscheibenprotrusion/-prolaps
- Spondylolisthese mit rezidivierenden Lumboischialgien
- Spinalkanalstenose
- Zustand nach Bandscheiben-Operation
- Spinalkanaldekompensation
- Stabile Wirbelkörperfrakturen

## Rezeptierung

EMO Lumback Infinity Plus  
Flexions-Korsett

## Positionsnummer

31550 049  
10 % Selbstbehalt  
bis 31.12.2025

## Facharzttrichtung

F

| Größe | Hüftumfang | Artikel-Nr.<br>Höhe: 26 cm dorsal / 19 cm ventral |
|-------|------------|---------------------------------------------------|
| S     | 85–95 cm   | CLS461-S                                          |
| M     | 95–105 cm  | CLS461-M                                          |
| L     | 105–115 cm | CLS461-L                                          |
| XL    | 115–125 cm | CLS461-XL                                         |
| XXL   | 125–135 cm | CLS461-XXL                                        |

## EXOS® Form™ II 637

Überbrückungskorsett mit stufenweiser  
Bewegungsfreigabe



### Wirkungsweise/Aufbau

- Stabilisierung und Ruhigstellung der LWS durch Einschränkung der Bewegungen und stufenweise Bewegungsfreigabe
- Hoher Stabilisierungsgrad durch T9-Rückenpanel, Seitenflügel und Bauchpelotte
- Modularer, sukzessiv abrüstbarer Produktaufbau
- Optimale Regulierung durch zwei unabhängige Flaschenzüge
- Leichte Handhabung durch BOA®-Verschluss
- Nur zwei Größen – optimale Lagerhaltung

### Anwendungsgebiete

- Entlastung der Lendenwirbelsäule durch Entlordosierung
- Schwerste Protrusion/Prolaps (konservativ und postoperativ)
- Spondylolisthese
- Wirbelfrakturen
- Spinalkanalstenose
- Spinalkanaldekompensation

### Rezeptierung

EXOS Form II 637  
Überbrückungskorsett mit stufenweiser  
Bewegungsfreigabe

### Positionsnummer

31661 026  
10% Selbstbehalt

### Facharztrichtung

F

| Größe | Hüftumfang | Artikel-Nr. |
|-------|------------|-------------|
| S/M   | 63–125 cm  | 300637-40   |
| L/XL  | 125–152 cm | 300637-60   |

## EXOS® Form™ II 621

Beckengürtel



### Wirkungsweise/Aufbau

- Stabilisierung des Beckenringes durch zirkuläre Kompression
- Einhand-Flaschenzug für leichtes Handling und optimale Kompression
- Silikonstreifen zur Rutsicherung
- Leichtes, innovatives Produktdesign
- Nur zwei Größen – optimale Lagerhaltung

### Anwendungsgebiete

- Schmerzen im Ileosakralgelenk
- Gefügelockerung des ISG
- Fehlfunktionen
- Symphysendehnung, -sprengung

### Rezeptierung

EXOS Form II 621  
Beckengürtel

### Positionsnummer

31520 024  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

| Größe | Hüftumfang | Artikel-Nr. |
|-------|------------|-------------|
| S/M   | 69–89 cm   | 300621-40   |
| L/XL  | 89–140 cm  | 300621-60   |

## DONJOY® IsoFORM™ SIO

Beckengürtel



### Wirkungsweise/Aufbau

- Einhand-Flaschenzug für leichtes Handling und optimale Kompression
- Silikonstreifen zur Rutsicherung
- Leichtes innovatives Produktdesign
- Nur zwei Größen – optimale Lagerhaltung
- Einfaches Anlegen durch integrierte Handschlaufen

### Anwendungsgebiete

- Schmerzen im Ileosakralgelenk
- Gefügelockerung des ISG
- Fehlfunktionen
- Symphysendehnung, -sprengung

### Rezeptierung


DONJOY® IsoFORM™ SIO  
Beckengürtel

### Positionsnummer

31520 034  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

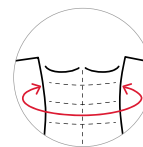

| Größe | Hüftumfang | Artikel-Nr. |
|-------|------------|-------------|
| S/M   | < 122 cm   | 11-1692-2   |
| L/XL  | 125–152 cm | 11-1692-4   |

## DONJOY® MyBabyStrap™

Umstandsmieder



Stufenlos einstellbare  
Zuggurte

### Wirkungsweise/Aufbau

- Rückenteil mit vier integrierten Stabilisierungselementen für die erforderliche Druckverteilung
- Entlastung der Bauchdecke, des Beckens und der Wirbelsäule
- Breite Klettgurte stützen den Bauchbereich
- Einstellbare Größe für jedes Schwangerschaftsstadium
- Abnehmbarer elastischer Gurt für zusätzliche Stabilisierung des Bauches

### Anwendungsgebiete

- Kreuzschmerzen
- Beckenschmerzen
- Iliosakralschmerzen
- Posturale Instabilität
- Beschwerden aufgrund der Abdomendehnung und -expansion
- Schmerzen und die Beschwerden, die mit der Schwangerschaft verbunden sind

### Rezeptierung


DONJOY MyBabyStrap  
Umstandsmieder

### Positionsnummer

31322 017  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

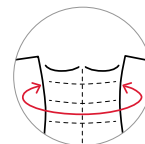

| Produkt     | Größe | Taillenumfang | Dorsale Höhe | Artikel-Nr. |
|-------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| MyBabyStrap | U     | 80–150 cm     | 22 cm        | 82-0276     |

## EXOS® Orthesen zur Immobilisierung

### EXOS® Hand/Unterarm



EXOS® Manu



EXOS® Manu Mini



EXOS® Carpa

### EXOS® Hand/Unterarm mit Fingerfixierung



EXOS® Boxer 4/5



EXOS® Manu Polax



EXOS® Manu Advance



EXOS® Rhiza

### EXOS® Daumen



EXOS® Polax

### EXOS® Wärmeofen



EXOS® Wärmeofen

### Wirkungsweise/Aufbau

- Thermoplastisch verformbares Material zur Stabilisierung, Ruhigstellung und Immobilisierung
- Schnell und individuell anformbar, jederzeit nachformbar

- Praktisches BOA®-Verschlussystem zur bedarfsgerechten Kompression
- Innenseite antibakteriell beschichtet
- Leicht, wasserfest, waschbar

\* Die Marke BOA® ist das Eigentum der BOA Technology, Inc.

## EXOS® Manu

Handgelenks-Lagerungs-Orthese, ungefütert



EXOS® Manu Mini

### Wirkungsweise/Aufbau

- Einschluss von  $\frac{3}{4}$  der Unterarmlänge
- Wahlweise mit rigidem und flexiblem Daumenbereich
- Zwei separate Kindergrößen

### Anwendungsgebiete

Dient der Stabilisierung und Ruhigstellung bei:

- Verletzungen des distalen Radius
- Verletzungen der distalen Ulna
- Handgelenksverletzungen

### Rezeptierung

EXOS Manu

### Positionsnummer

32431 028<sup>1</sup>


Selbstbehalt mindestens 43,00 €

32431 027<sup>2</sup>

Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

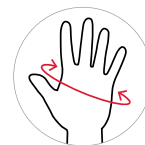

| Modell                       | Größe                                  | Handumfang   | Artikel-Nr. links* | Artikel-Nr. rechts* |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| EXOS® Manu Mini <sup>1</sup> | XXXS                                   | 14,5–16,5 cm | 311-11             | 311-12              |
|                              | XXS                                    | 16,5–18,5 cm | 311-21             | 311-22              |
|                              | XS                                     | 16,5–18,5 cm | 311-31             | 311-32              |
|                              | XS länger als XXS: Orthesenlänge 20 cm |              | 312-31             | 312-32              |
| EXOS® Manu <sup>2</sup>      | XS                                     | 18,5–20,0 cm | 312-31             | 312-32              |
|                              | S                                      | 20,0–23,0 cm | 312-41             | 312-42              |
|                              | M                                      | 23,0–25,5 cm | 312-51**           | 312-52**            |
|                              | L                                      | 25,5–28,0 cm | 312-61**           | 312-62**            |
|                              | XL                                     | > 28,0 cm    | 312-71**           | 312-72**            |

\* die 5-stellige Artikelnummer um den gewünschten Farbcode ergänzen

Black -1111

Spider -2293

\*\* nur in Black -1111 erhältlich



## EXOS® Manu Advance

Handgelenks-Lagerungs-Orthese



Schnelle, zirkuläre Anwendung durch den Längsklettverschluss möglich!

### Wirkungsweise/Aufbau

- Thermoplastisch verformbare Hand-/Unterarmorthese zur Immobilisierung
- Durch den längs verlaufenden Klettverschluss ist die Orthese komplett zu öffnen
- Individuelle Passform, jederzeit nachformbar
- Praktisches BOA®-Verschlusssystem zur bedarfsgerechten Kompression
- Leicht, wasserfest und waschbar

\* Die Marke BOA® ist das Eigentum der BOA Technology, Inc.

### Anwendungsgebiete

Dient der Immobilisierung, Stützung und Stabilisierung des Handgelenks und des distalen Unterarms bei:

- Handgelenksfrakturen
- Posttraumatischen Zuständen
- Konservativen, präoperativen und postoperativen Behandlungen
- Unterarmpseudoarthrosen
- verzögerter Bruchheilung

### Rezeptierung


EXOS Manu Advance

### Positionsnummer

32531 013  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharzttrichtung

F

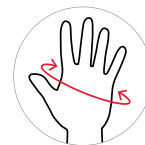

| Größe | Handumfang   | Artikel-Nr. links* | Artikel-Nr. rechts* |
|-------|--------------|--------------------|---------------------|
| XS    | 18,5–20,0 cm | 329-31-1111        | 329-32-1111         |
| S     | 20,0–23,0 cm | 329-41-1111        | 329-42-1111         |
| M     | 23,0–25,5 cm | 329-51-1111        | 329-52-1111         |
| L     | 25,5–28,0 cm | 329-61-1111        | 329-62-1111         |
| XL    | 28,0–30,5 cm | 329-71-1111        | 329-72-1111         |

\* nur in Black -1111 erhältlich

## EXOS® Carpa

Handgelenks-Lagerungs-Orthese, ungefütert



### Wirkungsweise/Aufbau

- Ruhigstellung des Handgelenks bei geringem Einschluss des Unterarms
- Bedarfsgerechte Fixierung des Klettstreifens zwischen Daumen und Zeigefinger

### Anwendungsgebiete

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung des Handgelenks in mindestens zwei Bewegungsebenen prä-/postoperativ/posttraumatisch notwendig ist, wie z. B.

- Verletzungen der Handwurzelknochen
- Radiokarpale Bandverletzungen
- Diskus-Verletzung (TFCC)

### Rezeptierung


EXOS Carpa

### Positionsnummer

32431 029  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharzttrichtung

F

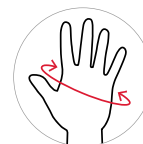

| Größe | Handumfang   | Artikel-Nr. links* | Artikel-Nr. rechts* |
|-------|--------------|--------------------|---------------------|
| XXS   | 16,5–18,5 cm | 221-21             | 221-22              |
| XS    | 18,5–20,0 cm | 221-31             | 221-32              |
| S     | 20,0–23,0 cm | 221-41             | 221-42              |
| M     | 23,0–25,5 cm | 221-51**           | 221-52**            |
| L     | 25,5–28,0 cm | 221-61**           | 221-62**            |
| XL    | > 28,0 cm    | 221-71**           | 221-72**            |

\* die 5-stellige Artikelnummer um den gewünschten Farbcode ergänzen

|             |  |              |  |
|-------------|--|--------------|--|
| Black -1111 |  | Spider -2293 |  |
|-------------|--|--------------|--|

\*\* nur in Black -1111 erhältlich

## EXOS® Polax

Daumenorthese zur Immobilisierung



### Wirkungsweise/Aufbau

- Ruhigstellung des Daumengrundgelenks
- Freibleibendes Daumenendglied
- Mobiles Handgelenk
- Patientengerechte Anpassung im Daumenbereich durch zusätzlichen Klettstreifen
- Besserer Komfort für den Daumen durch abgeklebte Abschlusskanten


### Anwendungsgebiete

Dient der prä- / postoperativ, posttraumatisch Stabilisierung und Ruhigstellung des Metakarophalangealgelenks (MCP) bei:

- Skidaumen
- Verletzungen des ulnaren Seitenbands
- MCP-Gelenk-Arthritis
- Sehnenscheidenentzündungen

### Rezeptierung

EXOS Polax

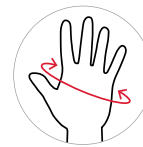

| Größe | Handumfang   | Artikel-Nr. links* | Artikel-Nr. rechts* |
|-------|--------------|--------------------|---------------------|
| XXS   | 16,5–18,5 cm | 212-21-1111        | 212-22-1111         |
| XS    | 18,5–20,0 cm | 212-31-1111        | 212-32-1111         |
| S     | 20,0–23,0 cm | 212-41-1111        | 212-42-1111         |
| M     | 23,0–25,5 cm | 212-51-1111        | 212-52-1111         |
| L     | 25,5–28,0 cm | 212-61-1111        | 212-62-1111         |
| XL    | > 28,0 cm    | 212-71-1111        | 212-72-1111         |

\* nur in Black -1111 erhältlich

## EXOS® Rhiza

Thermoplastisch verformbare Handorthese mit Daumeneinschluss zur Immobilisierung



### Wirkungsweise/Aufbau

- Handorthese mit Daumeneinschluss aus formfestem thermoplastischem Material
- Patientengerechte Anpassung im Daumenbereich durch zusätzlichen Klettstreifen
- Flacher & praktischer BOA® Verschluss

### Anwendungsgebiete

Die EXOS® Rhiza ist für die Stabilisierung und Ruhigstellung des ersten Metakarpophalangealgelenks (MCP) und des Karpometakarpalgelenks (CMC) vorgesehen. Die EXOS® Rhiza kann für Personen geeignet sein, die unter Arthrose leiden.

### Rezeptierung


EXOS Rhiza

### Positionsnummer

32134 058  
rückverrechnungsfähig beim jeweiligen Sozialversicherungsträger

### Facharztrichtung

F

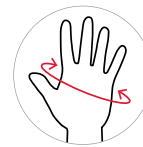

| Größe | Handumfang   | Artikel-Nr. links* | Artikel-Nr. rechts* |
|-------|--------------|--------------------|---------------------|
| XS    | 18,5–20,0 cm | 213-31-1111        | 213-32-1111         |
| S     | 20,0–23,0 cm | 213-41-1111        | 213-42-1111         |
| M     | 23,0–25,5 cm | 213-51-1111        | 213-52-1111         |
| L     | 25,5–28,0 cm | 213-61-1111        | 213-62-1111         |
| XL    | > 28,0 cm    | 213-71-1111        | 213-72-1111         |

\* nur in Black -1111 erhältlich

## EXOS® Boxer 4/5

Orthese zur Immobilisierung



### Wirkungsweise/Aufbau

- Drei zusätzliche Klettstreifen zur bedarfsgerechten Fixierung der Finger und der Hand
- ½-Einschluss der Unterarmlänge
- Daumen, Zeige- und Mittelfinger sind frei beweglich
- Finger können im unterschiedlichen Winkel ruhig gestellt werden


### Anwendungsgebiete

Dient der Stützung, Stabilisierung und Ruhigstellung bei:

- Verletzungen des vierten und fünften Mittelhandknochen
- Verletzungen der vierten und fünften Interphalangealgelenke
- Handgelenksverletzungen

### Rezeptierung

EXOS Boxer 4/5

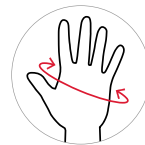

| Größe | Handumfang   | Artikel-Nr. links* | Artikel-Nr. rechts* |
|-------|--------------|--------------------|---------------------|
| XS    | 18,5–20,0 cm | 325-31-1111        | 325-32-1111         |
| S     | 20,0–23,0 cm | 325-41-1111        | 325-42-1111         |
| M     | 23,0–25,5 cm | 325-51-1111        | 325-52-1111         |
| L     | 25,5–28,0 cm | 325-61-1111        | 325-62-1111         |
| XL    | > 28,0 cm    | 325-71-1111        | 325-72-1111         |

\* nur in Black -1111 erhältlich

## EXOS® Manu Polax

Handgelenks-Lagerungs-Orthese mit Daumen ungefütert



### Wirkungsweise/Aufbau

- Komplette Ruhigstellung des Handgelenks und des Daumens
- Freibleibendes Daumenglied
- Patientengerechte Anpassung im Daumenbereich durch zusätzlichen Klettstreifen
- Einschluss von  $\frac{3}{4}$  der Unterarmlänge – Verlängerung nach proximal
- Besserer Komfort für den Daumen durch abgeklebte Abschlusskanten

### Anwendungsgebiete

Dient der Ruhigstellung und Immobilisierung des Handgelenks in mind. zwei Bewegungsrichtungen bei freier Fingerbeweglichkeit bei:

- Karpaltunnelsyndrom (CTS)
- Skaphoidfrakturen
- Zerrung der radialen/ ulnaren Bänder
- Bennett-/ Rolando - Frakturen
- CMC-Gelenk Arthritis
- distalen Radius-/ Ulnafrakturen

### Rezeptierung


EXOS Manu Polax  
Handgelenks-Lagerungs-Orthese

### Positionsnummer

32433 020  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

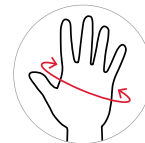

| Größe | Handumfang   | Artikel-Nr. links* | Artikel-Nr. rechts* |
|-------|--------------|--------------------|---------------------|
| XXS   | 16,5–18,5 cm | 232-21-1111        | 232-22-1111         |
| XS    | 18,5–20,0 cm | 232-31-1111        | 232-32-1111         |
| S     | 20,0–23,0 cm | 232-41-1111        | 232-42-1111         |
| M     | 23,0–25,5 cm | 232-51-1111        | 232-52-1111         |
| L     | 25,5–28,0 cm | 232-61-1111        | 232-62-1111         |
| XL    | > 28,0 cm    | 232-71-1111        | 232-72-1111         |

\* nur in Black -1111 erhältlich

## DONJOY® DigiForm+™

Hand-Lagerungs-Orthese, gefüttert



### Wirkungsweise/Aufbau

- Fingerorthese zur Ruhigstellung von vier Fingern
- Formfestes Material von den Fingerspitzen bis zum Unterarm erfolgt eine Ruhigstellung von Handgelenk und Fingergelenken
- Zirkuläre Verschlüsse
- 4-Gurt-System ermöglicht optimale Stabilität und einen ausgezeichneten Sitz
- Fingerstütze je nach Bedarf auf 3 oder 4 Finger anpassbar

### Anwendungsgebiete

- Schmerzhafte Arthrosen im Handgelenk und/oder in den Fingergrundgelenken
- Rheumatische Veränderungen der Fingergelenke
- Lagerung bei Lähmungen
- Verstauchungen, Verrenkungen
- Subluxationen, Frakturen des Fingers bzw. der Finger
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

### Rezeptierung

DONJOY DigiForm+  
Hand-Lagerungs-Orthese mit  
4-Finger-Fixierung

### Positionsnummer

32332 027  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F



| Handgelenkumfang | Seite | Größe  | Artikel-Nr. |
|------------------|-------|--------|-------------|
| 11–14 cm         | U     | Ped/XS | 82-96210    |
| 14–16 cm         | U     | S      | 82-96212    |
| 16–19 cm         | U     | M      | 82-96213    |
| 19–21 cm         | U     | L      | 82-96214    |
| 21–24 cm         | U     | XL     | 82-96215    |

## DONJOY® DuoForm™

Handgelenks-Lagerungs-Orthese, gefüttert



### Wirkungsweise/Aufbau

- Orthese zur Immobilisierung des Handgelenks
- Seitenuniversell
- 3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität
- Mittlerer Gurt zirkulär für noch höhere Stabilität
- Individuell versetzbare, dorsale Aluminiumschiene
- Orthese proximal relativ lang

### Anwendungsgebiete

- Handgelenkverstauchungen, -zerrungen und -verletzungen
- Ruhigstellung von Handgelenk vor und nach Operationen

### Rezeptierung

DONJOY DuoForm  
Handgelenks-Lagerungs-Orthese, gefüttert

### Positionsnummer

32432 039  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F



| Handgelenkumfang | Seite | Größe | Artikel-Nr. |
|------------------|-------|-------|-------------|
| 11–14 cm         | U     | XS    | 82-96130    |
| 14–16 cm         | U     | S     | 82-96132    |
| 16–19 cm         | U     | M     | 82-96133    |
| 19–21 cm         | U     | L     | 82-96134    |
| 21–24 cm         | U     | XL    | 82-96135    |



## DONJOY® ManuForm™

Handgelenks-Lagerungs-Orthese, gefüttert



### Anwendungsgebiete

- Verstauchungen und Zerrungen des Handgelenks
- Tendinopathie, Karpaltunnelsyndrom
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

### Rezeptierung

DONJOY ManuForm  
Handgelenks-Lagerungs-Orthese, gefüttert

### Positionsnummer

32432 040  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

### Wirkungsweise/Aufbau

- Anformbare Aluminiumstäbe
- 3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität
- Mit einer Hand anzulegen
- Knopf verhindert das Herausrutschen des Gurtes aus der Schnalle
- 104 g: Extrem leicht am Arm zu Tragen



| Handgelenkumfang | Seite | Größe  | Artikel-Nr. |
|------------------|-------|--------|-------------|
| 11–14 cm         | U     | Ped/XS | 82-96260    |
| 14–16 cm         | U     | S      | 82-96262    |
| 16–19 cm         | U     | M      | 82-96263    |
| 19–21 cm         | U     | L      | 82-96264    |
| 21–24 cm         | U     | XL     | 82-96265    |

## DONJOY® ManuForm+™

Handgelenks-Lagerungs-Orthese mit Daumen gefüttert



### Wirkungsweise/Aufbau

- Anformbare Aluminiumstäbe
- 3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität
- 2 dorsale Schienen
- Mit einer Hand anzulegen
- 116 g: Extrem leicht am Arm zu tragen

### Anwendungsgebiete

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks mit Daumenfixierung notwendig ist, wie z. B.:

- Verstauchungen und Zerrungen, Tendinopathie
- Rhizarthrose
- Karpaltunnelsyndrom
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

### Rezeptierung

DONJOY MANUFORM+™  
Handgelenks-Lagerungs-Orthese mit  
Daumen gefüttert

### Positionsnummer

32434 059  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F



| Handgelenkumfang | Größe  | Artikel-Nr. links | Artikel-Nr. rechts |
|------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 11–14 cm         | Ped/XS | 82-96270          | 82-96280           |
| 14–16 cm         | S      | 82-96272          | 82-96282           |
| 16–19 cm         | M      | 82-96273          | 82-96283           |
| 19–21 cm         | L      | 82-96274          | 82-96284           |
| 21–24 cm         | XL     | 82-96275          | 82-96285           |

## DONJOY® RhizoForm™

Daumen-Stabilisierungs-Orthese



### Wirkungsweise/Aufbau

- Daumenorthese zur Immobilisierung des Daumengrundgelenkes
- Perfekt für das tägliche Leben: Mit einer Hand anlegbar
- Erhöhte Atmungsaktivität durch das Skelett-Design
- Antibakterielles, hypoallergenes und thermoregulierendes Innenmaterial
- Superleicht: 23 g!

### Anwendungsgebiete

- Bandinstabilität im Daumengrundgelenk
- Bewegungsschmerzen bei Arthrose im Daumengrundgelenk
- Verstauchungen und Luxationen des Daumens
- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung

### Rezeptierung

DONJOY RhizoForm  
Daumen-Stabilisierungs-Orthese

### Positionsnummer

32120 066  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F



| Handgelenkumfang | Seite  | Größe | Artikel-Nr. |
|------------------|--------|-------|-------------|
| 13,0–16,5 cm     | links  | S/M   | 82-96242    |
| 16,5–20,0 cm     | links  | L/XL  | 82-96243    |
| 13,5–16,5 cm     | rechts | S/M   | 82-96292    |
| 16,5–20,0 cm     | rechts | L/XL  | 82-96293    |

## DONJOY® ErgoForm™

Daumen-Stabilisierungs-Orthese



### Wirkungsweise/Aufbau

- Hoher Tragekomfort
- Seitenuniversell
- Anpassbares und angenehmes Daumenband
- Praktisches Anlagesystem – mit einer Hand anlegbar

### Anwendungsgebiete

- Bandinstabilität im Daumengrundgelenk
- Bewegungsschmerzen bei Arthrose im Daumengrundgelenk
- Verstauchungen und Luxationen des Daumens
- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung

### Rezeptierung

DONJOY ErgoForm  
Daumen-Stabilisierungs-Orthese

### Positionsnummer

32120 065  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F



| Handgelenkumfang | Seite | Größe | Artikel-Nr. |
|------------------|-------|-------|-------------|
| 12–16 cm         | U     | 0     | 82-96190    |
| 14–18 cm         | U     | 1     | 82-96191    |
| 18–22 cm         | U     | 2     | 82-96192    |

## DONJOY® EpiForce®

Ellenbogen-Bandage mit Pelotten



### Wirkungsweise/Aufbau

- Silikondruckpelotten zur Entlastung des Sehnenansatzes bei Tennis- oder Golferarm
- Komfortzone in der Ellenbeuge für ein angenehmes Tragegefühl
- Einstellbarer und abnehmbarer Kompressionsgurt
- Seitenuniversell

### Anwendungsgebiete

- Unterstützung und Kompression bei Ellenbogenverletzungen
- Leichte Arthrose im Ellenbogen
- Propriozeptive Stimulation durch Kompression
- Prävention von Verletzungen
- Ellenbogenverstauchungen und -zerrungen
- Mediale oder laterale Epicondylitis (z. B. Golfarm oder Tennisarm)
- Sehnenentzündungen

### Rezeptierung


DONJOY EpiForce  
Ellenbogen-Bandage mit Pelotten

### Positionsnummer

32602 073  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

P

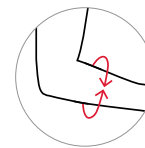

| Größe | Umfang in cm | Seite | Artikel-Nr. |
|-------|--------------|-------|-------------|
| 1     | 19–22 cm     | U     | 82-1759-1   |
| 2     | 22–25 cm     | U     | 82-1759-2   |
| 3     | 25–28 cm     | U     | 82-1759-3   |
| 4     | 28–31 cm     | U     | 82-1759-4   |
| 5     | 31–34 cm     | U     | 82-1759-5   |
| 6     | 34–37 cm     | U     | 82-1759-6   |

## DONJOY® EpiForce® Strong

Epicondylitis-Spange



### Anwendungsgebiete

Ellenbogenschmerzen aufgrund von:

- Überbeanspruchung
- chronischer Entzündung,
- mediale oder laterale Epicondylitis z.B. Tennisarm, Golferarm
- bei Myo- und Tendopathien

### Rezeptierung

DONJOY EpiForce Strong

### Tarifnummer

32511 035

Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

P

### Wirkungsweise/Aufbau

- Schnappband für eine einhändige, schnelle Anlage
- Stufenlos einstellbarer Gurt für optimalen Druck
- Anatomisches Design für optimale Passform
- Versetzbare Druckpelotte zur Entlastung und Schmerzreduktion

| Größe | Seite | Artikel-Nr. |
|-------|-------|-------------|
| U     | U     | 82-1760     |

## PROCARE® Elbow Ranger®

Ellbogen-Führungs-Orthese mit einstellbarem Bewegungsumfang



### Wirkungsweise/Aufbau

- Limitierte Führung des Ellbogengelenkes
- Ruhigstellung des Ellenbogengelenks in vorgegebenem Beugewinkel
- Bewegungsumfang kann in 30°-Schritten stufenweise freigegeben werden
- Der Arm wird in einer abgepolsterten Kunststoffschale mit zirkulären Gurten sicher gelagert
- Fixierung des Handgelenks in neutraler Position

### Anwendungsgebiete

Dient zur Stabilisierung, Immobilisierung und Ruhigstellung bei:

- stabilen Radiusköpfchenfrakturen
- postoperativ nach Ellenbogenoperationen

### Rezeptierung


PROCARE Elbow Ranger  
Armlagerungsorthese

### Positionsnummer

32741 020  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

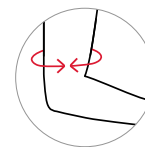

| Größe | Umfang*  | Seite | Artikel-Nr. |
|-------|----------|-------|-------------|
| S     | 20–29 cm | U     | 79-94200    |
| M     | 29–37 cm | U     | 79-94210    |
| L     | 37–48 cm | U     | 79-94220    |

\* Mitte Oberarm

## DONJOY® X-Act ROM Elbow

Ellbogen-Führungs-Orthese mit einstellbarem Bewegungsumfang



X-Act ROM Elbow mit Handteil



### Wirkungsweise/Aufbau

- Limitierte Führung des Ellbogengelenkes
- Seitliche Teleskopschienen zur optimalen Anpassung an die Armlänge
- Neuartiges flaches ROM-Gelenk aus stabilem Aluminium
- Simple werkzeuglose Einstellung von -10° bis 90° Extension und -10° bis 120° Flexion jeweils in 10°-Schritten

- Quick-Lock-Funktion von 0° bis 90° in 15°-Schritten
- Clip-Verschlüsse für sicheres An- und Ablegen der Orthese
- Optionales Handteil zur Verhinderung von Supination/Pronation

### Anwendungsgebiete

- Postoperativ bei Mobilisierung nach Ellbogenoperationen.
- Konservativ bei Ellenbogenluxationen mit und ohne Begleitverletzungen
- Prothesenimplantation
- Temporäre Ruhigstellung nach Ellenbogen-Arthrolyse
- Bizepssehnen- und Muskelverletzungen

### Rezeptierung


DONJOY X-Act ROM Elbow  
Ellbogenorthese

### Positionsnummer

32741 029  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharzttrichtung

F

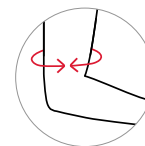

| Größe | Seite  | Orthesenlänge | Oberarmumfang | Artikel-Nr. |
|-------|--------|---------------|---------------|-------------|
| U     | links  | 36–46 cm      | 26,8–55,8 cm  | 11-9122     |
| U     | rechts | 36–46 cm      | 26,8–55,8 cm  | 11-9121     |

### Supination-/Pronation-Komponente (Handteil):

| Größe | Seite  | Artikel-Nr. |
|-------|--------|-------------|
| U     | links  | 25-6759     |
| U     | rechts | 25-6756     |



## DONJOY® Ultrasling® Quadrant

Schulter – Abduktions – Orthese



optionaler  
Schultergurt

### Wirkungsweise/Aufbau

- Eine Größe pro Seite – one size fits all
- Individuell und werkzeuglos auf gewünschten Rotations- und Abduktionsgrad einstellbar
- Hohe Stabilität sichert Behandlungserfolg
- Schulter wird von der Hüfte aus gestützt
- Optionaler Schultergurt möglich

### Anwendungsgebiete

- Konservative, postoperative und Therapie von Schultergelenkverletzungen
- Kontrakturneigung bei schmerzhafter Bewegungseinschränkung
- Lähmung
- Mobilisierung einer Schultersteifigkeit (z. B.: frozen shoulder)

### Rezeptierung


DONJOY Ultrasling Quadrant

### Positionsnummer

33530 021  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

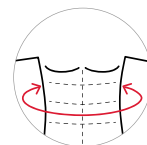

### DONJOY® Ultrasling® Quadrant

| Größe | Hüftumfang | Seite  | Artikel-Nr. |
|-------|------------|--------|-------------|
| U     | 61–114 cm  | rechts | 11-0210     |
| U     | 61–114 cm  | links  | 11-0211     |

### Zubehör Verlängerungsgurt

|   |            |   |         |
|---|------------|---|---------|
| U | 114–152 cm | U | 25-0212 |
|---|------------|---|---------|

## DONJOY® PSI Plus

Oberarm – Schulter – Fixations-Bandage



### Wirkungsweise/Aufbau

- Ruhigstellung des Schultergelenks nach dem Prinzip des Gilchrist-Verbandes
- Patientenschonende, individuelle und leichte Anpassung
- Hoher Tragekomfort durch angenehmes Material
- Zwei Handschlaufen zur Auswahl inklusive:
  - Variante 1: Unterarmschlaufe lösbar und zur Nachbehandlung zu öffnen
  - Variante 2: Geschlossenes Handteil
- Universell für links und rechts

### Anwendungsgebiete

- Prä- und postoperativ zur Ruhigstellung
- Chronische Weichteilreizzustände im Schulterbereich
- Subcapitale Humerusfraktur
- AC-Gelenksverletzung
- Arthrose im Schultergelenk
- Lähmung der Schultermuskulatur

### Rezeptierung


DONJOY PSI Plus  
Schultergelenkorthese

### Positionsnummer

33522 029  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

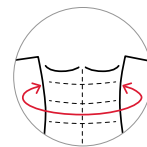

| Größe    | Bauchumfang in cm | Artikel-Nr.  |
|----------|-------------------|--------------|
| Standard | < 115 cm          | OX 0380 Plus |
| Large    | 115–135 cm        | OX 0381 Plus |

## DONJOY® Ultrasling® III

Schulter – Abduktions – Polster bis 29 °



### Wirkungsweise/Aufbau

- Optimale und sichere Lagerung des Armes bis zur Mittelhand durch anatomisch geformte Armschlinge
- Lagerung zur Prophylaxe einer Schulterkontraktur
- Einfache postoperative Mobilisation durch Öffnen der Unterarmschlinge ohne Abnahme des gesamten Verbandes
- Schnellverschlüsse ermöglichen eine leichte und schnelle Handhabung

### Anwendungsgebiete

- Postoperative Ruhigstellung allgemein
- Nachbehandlung von Bizepssehnenverletzungen und Muskelverletzungen
- Behandlung chronischer Schmerzzustände
- Mobilisierung (z.B. bei frozen shoulder)

### Rezeptierung


DONJOY Ultrasling III  
Schultergelenkorthese

### Positionsnummer

33221 033  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

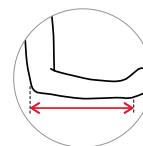

| Größe | Unterarmlänge* | Artikel-Nr. |
|-------|----------------|-------------|
| S     | < 27 cm        | 11-0449-2   |
| M     | 27–33 cm       | 11-0449-3   |
| L     | 33–38 cm       | 11-0449-4   |
| XL    | > 38 cm        | 11-0449-5   |

\* Unterarm ab Mittelhand

## AIRCAST® Arm Immobilizer

Oberarm – Schulter – Fixations-Bandage



### Wirkungsweise/Aufbau

- Ruhigstellung und Stabilisierung der Schulter, des Ober- und Unterarms durch Fixierung am Körper
- Innovatives Gurtsystem limitiert die posteriore Armmobilität
- Entlastung des Nackens durch Rücken- und Unterarmriemen

### Anwendungsgebiete

- Prä- und postoperativ zur Ruhigstellung
- Chronische Weichteilreizzustände im Schulterbereich
- Subcapitale Humerusfraktur
- AC-Gelenksverletzung
- Arthrose im Schultergelenk
- Lähmung der Schultermuskulatur

### Rezeptierung


AIRCAST Arm Immobilizer

### Positionsnummer

Immobilizer ohne Abduktionskissen:  
33522 022  
Selbstbehalt mindestens 43,00 €

### Facharztrichtung

F

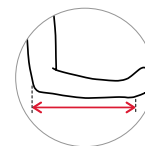

| Version               | Größe | Unterarmlänge* | Seite | Artikel-Nr. |
|-----------------------|-------|----------------|-------|-------------|
| ohne Abduktionskissen | M     | < 25 cm        | U     | 06GM        |
| ohne Abduktionskissen | L     | > 25 cm        | U     | 06GL        |

## AIRCAST® Cryo/Cuff™ Kanne

Kälte-Kompression



### Anwendungsgebiete

- Reduzierung von Schwellungen und Gelenkergüssen
- Schmerzlinderung
- Lokale externe Anwendung einer Kältetherapie und Kompression
- Manschetten sind für jedes Gelenk verfügbar

### Wirkungsweise/Aufbau

- Kältetherapie-System zur Reduzierung von Schwellungen und Schmerzen
- Einfache Handhabung
- Zur postoperativen und posttraumatischen Behandlung
- Zur Verwendung mit den Cryo/Cuff™ Bandagen

Artikel-Nr.

2125

## AIRCAST® Cryo/Cuff™ Kniebandage

Kälte-Kompression



### Anwendungsgebiete

- Reduktion von Schwellungen und Schmerzen

### Wirkungsweise/Aufbau

- Kältetherapie-System zur Reduzierung von Schwellungen und Schmerzen
- Kniebandage zur Verwendung mit der Cryo/Cuff™ Kanne
- Einfache Handhabung
- Zur postoperativen und posttraumatischen Behandlung

| Größe | Umfang*  | Seite | Artikel-Nr. |
|-------|----------|-------|-------------|
| S     | 25–50 cm | U     | 11C01       |
| M     | 45–60 cm | U     | 11A01       |
| L     | 50–80 cm | U     | 11B01       |

\* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb Patella

## AIRCAST® Cryo/Cuff™ Schulterbandage

Kälte-Kompression



- Für Patienten mit größerem Brustumfang kann die Bandage mit einem extralangen Band bestellt werden
- Die Bänder (Standard oder extralang) sind separat erhältlich

### Anwendungsgebiete

- Reduktion von Schwellungen und Schmerzen

### Wirkungsweise/Aufbau

- Kältetherapie-System zur Reduzierung von Schwellungen und Schmerzen
- Schulterbandage zur Verwendung mit der Cryo/Cuff™ Kanne
- Einfache Handhabung
- Zur postoperativen und posttraumatischen Behandlung
- Kühlung des gesamten Schultergelenks

| Größe           | Größe    | Umfang*    | Seite | Artikel-Nr. |
|-----------------|----------|------------|-------|-------------|
| Schulterbandage | Standard | 81–122 cm  | U     | 12A01       |
| Schulterbandage | XL       | 107–137 cm | U     | 12AXL01     |
| Schulterband    | Standard | 81–122 cm  | U     | 1220        |
| Schulterband    | XL       | 107–137 cm | U     | 1220XL      |

\* Brustkorbumfang

## ARTROMOT® Home-Care Service

Die Home-Care-Versorgung von Patienten mit ARTROMOT® CPM-Bewegungsschienen zur kontinuierlichen passiven Mobilisation von Gelenken ist seit langem fester Bestandteil eines multimodalen Nachbehandlungskonzeptes und hat in vielen Leitlinien in Deutschland und Österreich Einzug gehalten.

In Österreich bietet die Firma ORTHOMED, als Mitglied des Enovis Konzerns, diesen Service für Sie und Ihre Patienten landesweit seit über 25 Jahren an.

### Verordnung der CPM-Therapie zur Miete

3 Schritte zur erfolgreichen Versorgung Ihrer Patienten

1. Verordnungsschein vollständig ausfüllen (siehe Beispiel)  
Hinweis: Verordnungsdauer: i. d. R. 4 Wochen
2. ARTROMOT®- Behandlungsplan ausfüllen  
(Wichtig für die korrekte Auslieferung an Ihre Patienten)
3. Verordnungsschein und Behandlungsplan dem Patienten aushändigen, der sich über die Telefonnummer 01/532 08 34 für die Therapie anmeldet

Die Original-Verordnung bitte dem Patienten mitgeben, damit dieser sie an uns weiterleiten kann oder bei der Auslieferung an unseren Patientenbetreuer übergeben kann.

- Sobald die Verordnung bei uns eingegangen ist, meldet sich einer unserer Patientenbetreuer telefonisch bei Ihren Patienten an, und vereinbart den Liefertermin für die ARTROMOT®-Bewegungsschiene.
- Der Patientenbetreuer liefert die verordnete ARTROMOT®-Bewegungsschiene Ihrem Patienten nach Hause, stellt sie individuell ein und schult den Gebrauch.

- Bei Rückfragen steht der Patientenbetreuer oder unser Telefon in der Zentrale unter 01/532 08 34, jedem Patienten gerne zur Verfügung.
- Bei Therapieende vereinbart der Enovis-Patientenbetreuer mit Ihrem Patienten den Abholungstermin der ARTROMOT®-Bewegungsschiene.

Bei zwischenzeitlichen Änderungen der Therapiezeit (z.B. Reha-Aufenthalt) bitten wir den Patienten das dem Betreuer bekannt zu geben.

#### 1. Beispiel für einen Verordnungsschein

The image shows a blank 'Verordnung' (Prescription) form for ARTROMOT®. It includes fields for patient information (Name, Geburtsdatum, etc.), a section for the physician's details (Name, Adresse, etc.), and a large section for the prescription itself, including checkboxes for 'Beurteilung' (Assessment) and 'Behandlung' (Treatment). The form is titled 'Verordnung zur Heilbehandlung und Rehabilitation'.

Verordnungstext:

1 ARTROMOT-..... Bewegungsschiene

Dauer: Für ..... Wochen

Diagnose: .....

OP-Datum: .....

Entl.-Datum: .....

Tel. Patient: .....

#### 2. Beispiel für einen ausgefüllten ARTROMOT®-Therapieplan


The image shows a filled 'BEHANDLUNGSPLAN' (Treatment Plan) for ARTROMOT®. It includes a section for patient information, a section for the physician's details, and a large section for the treatment plan itself, including checkboxes for 'Beurteilung' (Assessment) and 'Behandlung' (Treatment). The form is titled 'ARTROMOT®-HOMECARE SERVICE'.

**Telefonnummer:** +43 (0) 1/532 08 34  
**Telefax:** +43 (0) 1/532083431  
**E-Mail:** Homecareservice-AT@enovis.com



## ARTROMOT® ACTIVE-K

CPM · CAM · Koordination  
für das Knie- und Hüftgelenk

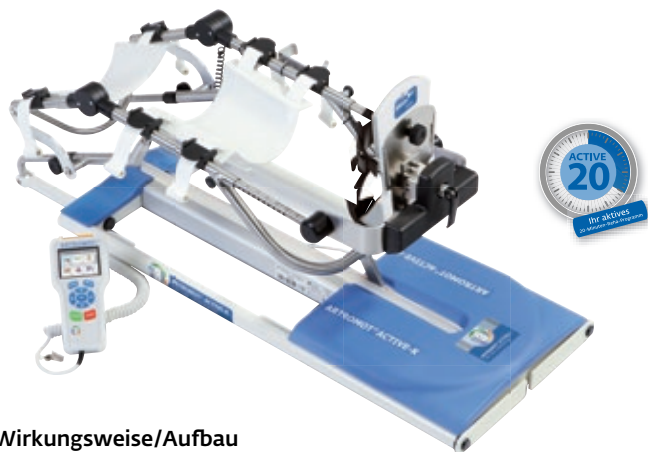

### Wirkungsweise/Aufbau

- Drei Therapieansätze in einem Gerät:

#### Passiv:

Mobilisation – Passive Bewegung innerhalb der eingestellten Werte gemäß der Continuous-Passive-Motion-Therapie (CPM-Therapie)

#### Aktiv:

Steigerung der funktionellen Stabilität – aktive Bewegung innerhalb der eingestellten Werte gemäß der Controlled-Active-Motion-Therapie (CAM-Therapie)

#### Koordination:

Steigerung der Propriozeption – verschiedene Programme, basierend auf bestehenden Physiotherapie-Protokollen, zur Steigerung der Koordinationsfähigkeit/Propriozeption

- Weltweit einzige Bewegungsschiene, die diese drei postoperativen Behandlungsziele kombiniert
- Voreingestellte Therapieprogramme für die 3 häufigsten Indikationen: Kreuzband, Knorpel und TEP
- Interaktives Display zur einfachen Anwendung
- Maximale Sicherheit durch stabile Führung des gesamten Beines

### Anwendungsgebiete

- Arthrotomien und Arthroskopien in Kombination mit Synovektomie, Arthrolyse
- Operationen am Gelenkknorpel, z. B. ACT, Microfracture
- Operativ versorgte Frakturen und Pseudarthrosen
- Nach Gelenkmobilisation in Narkose
- Übungsstabile Osteosynthese
- Gelenknahe Weichteileingriffe
- Komplexe Knieoperationen
- Kreuzbandplastiken
- Umstellungsosteotomien
- Menispektomien
- Patellektomien
- Knie-/Hüft-TEP

### Rezeptierung

ARTROMOT ACTIVE-K  
Therapiegerät

Artikel-Nr.

80.00.070

## ARTROMOT®-K1

Motorisierte Bewegungsschiene  
für das Knie- und Hüftgelenk



Hand-  
Programmiereinheit  
ARTROMOT®-K1  
Classic



Hand-  
Programmiereinheit  
ARTROMOT®-K1  
Standard  
ARTROMOT®-K1  
Comfort

### Wirkungsweise/Aufbau

- Erhält die Gelenkbeweglichkeit
- Sichert den Behandlungserfolg
- Verkürzt die Rehabilitationsdauer
- Kann mit einer besonders breiten XL-Beinauflage für Patienten mit adipösen Beinen und Ödemen ausgestattet werden

### Anwendungsgebiete

- Arthrotomien und Arthroskopien in Kombination mit Synovektomie, Arthrolyse
- Operationen am Gelenkknorpel, z. B. Autologe Chondrozyten-Transplantation
- Operativ versorgte Frakturen und Pseudarthrosen
- Nach Gelenkmobilisation in Narkose
- Übungsstabile Osteosynthese
- Gelenknahe Weichteileingriffe
- Komplexe Knieoperationen
- Kreuzbandplastiken
- Umstellungsosteotomien
- Menispektomien
- Patellektomien
- Knie-/Hüft-TEP

### Rezeptierung

ARTROMOT-K1  
Kniebewegungsschiene

| Version                    | Artikel-Nr. |
|----------------------------|-------------|
| ARTROMOT®-K1 Classic       | 80.00.045   |
| ARTROMOT®-K1 Standard      | 80.00.040   |
| ARTROMOT®-K1 Standard Chip | 80.00.041   |
| ARTROMOT®-K1 Comfort       | 80.00.042   |
| ARTROMOT®-K1 Comfort Chip  | 80.00.043   |

## ARTROMOT®-S3

Motorisierte Bewegungsschiene  
für das Schultergelenk



Grafik-  
Handcontroller

### Wirkungsweise/Aufbau

- Erhalt die Gelenkbeweglichkeit
- Sichert den Behandlungserfolg
- Verkürzt die Rehabilitationsdauer
- Grafik-Handcontroller mit großem Display, leicht verständlichen Piktogrammen und intuitiver Menüführung

### Anwendungsgebiete

- Arthrotomien, Arthroskopien in Kombination mit Synovektomie
- Arthrolyse
- Nach Gelenkmobilisation in Narkose
- Operativ versorgte Frakturen und Pseudarthrosen
- Übungsstabile Osteosynthesen
- Endoprothesenimplantation
- Operativ behandelte Impingementsyndrome
- Acromioplastiken
- Dekompressionsoperationen
- Rekonstruktion der Rotatorenmanschette

### Rezeptierung

ARTROMOT-S3  
Schulterbewegungsschiene

| Version              | Artikel-Nr. |
|----------------------|-------------|
| ARTROMOT®-S3         | 80.00.023   |
| ARTROMOT®-S3 Comfort | 80.00.024   |

## ARTROMOT®-S4

Motorisierte Bewegungsschiene  
für das Schultergelenk



Touch-  
Handcontroller

### Wirkungsweise/Aufbau

- Erhält die Gelenkbeweglichkeit
- Sichert den Behandlungserfolg
- Verkürzt die Rehabilitationsdauer

- Drei integrierte Motoren
- Bewegungsmuster nach „PNF“ und die altbewährte „Welle“
- Interaktiv angeleiteter Seitenumbau

### Anwendungsgebiete

- Arthrotomien, Arthroskopien in Kombination mit Synovektomie
- Arthrolyse
- Nach Gelenkmobilisation in Narkose
- Operativ versorgte Frakturen und Pseudarthrosen
- Übungsstabile Osteosynthesen
- Endoprothesenimplantation
- Operativ behandelte Impingementsyndrome
- Acromioplastiken
- Dekompressionsoperationen
- Rekonstruktion der Rotatorenmanschette

### Rezeptierung

ARTROMOT-S4  
Schulterbewegungsschiene

| Version      | Artikel-Nr. |
|--------------|-------------|
| ARTROMOT®-S4 | 80.00.084C  |

## ARTROMOT®-E2

Motorisierte Bewegungsschiene für das Ellenbogengelenk



Grafik-  
Handcontroller

### Wirkungsweise/Aufbau

- Erhält die Gelenkbeweglichkeit
- Sichert den Behandlungserfolg
- Verkürzt die Rehabilitationsdauer
- Stuhl- oder Stativ-Version erhältlich
- Lagerung des Unterarms in einer bequemen Sandwich-Schale

### Anwendungsgebiete

- Arthrotomien, Arthroskopien in Kombination mit Synovektomie, Arthrolyse
- Operativ versorgte Bizepssehnenrekonstruktionen
- Operativ versorgte Frakturen und Pseudarthrosen
- Nach Gelenkmobilisation in Narkose
- Übungsstabile Osteosynthesen
- Gelenknahe Weichteileingriffe
- Endoprothesenimplantation

### Rezeptierung

ARTROMOT-E2  
Ellenbogenbewegungsschiene



ARTROMOT®-E2 Compact (Stativversion)

| Version                              | Artikel-Nr. |
|--------------------------------------|-------------|
| ARTROMOT®-E2 (Stuhlversion)          | 80.00.031   |
| ARTROMOT®-E2 Compact (Stativversion) | 80.00.033   |

## ARTROMOT®-SP3

Motorisierte Bewegungsschiene für das Sprunggelenk



ARTROMOT®-SP3 Comfort Chip



Grafik-  
Handcontroller

### Wirkungsweise/Aufbau

- Erhält die Gelenkbeweglichkeit
- Sichert den Behandlungserfolg
- Verkürzt die Rehabilitationsdauer
- Bietet maximale Ergonomie und Hygiene durch einfachste Einstellung und wisch-desinfizierbare Bein- und Fußauflagen

### Anwendungsgebiete

- Arthrotomien, Arthroskopien in Kombination mit Synovektomie, Arthrolyse
- Operativ versorgte Frakturen und Pseudarthrosen
- Rekonstruktive Eingriffe an Sehnen und Bändern
- Operativ versorgte Knorpeldefekte
- Achillessehnenrekonstruktionen
- Übungsstabile Osteosynthesen
- Gelenknahe Weichteileingriffe

### Rezeptierung

ARTROMOT-SP3  
Bewegungsschiene für das Sprunggelenk

| Version                     | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|-------------|
| ARTROMOT®-SP3 Standard      | 80.00.035   |
| ARTROMOT®-SP3 Standard Chip | 80.00.036   |
| ARTROMOT®-SP3 Comfort       | 80.00.037   |
| ARTROMOT®-SP3 Comfort Chip  | 80.00.038   |

## CHATTANOOGA® Intellect® RPW 2 Stoßwelle

Radiale Stoßwelle – pneumatisch



Intellect® RPW LITE

### Pluspunkte

- Neuartiges Falcon-Handstück
- Hochmoderne Navigation mittels Touchscreen-Display\*
- Einstellen der Behandlungsparameter über Indikations-Schnellwahl-Funktion und klinische Protokolle\*
- Optimale Anpassung des Energiepegels (Rampenfunktion)\*

- Klinische Bibliothek zur Anatomie, Applikatoren-Platzierung und Erklärungen zur Stoßwellentherapie\*
- V-Actor® HF Option (Vibration) für die Massagefunktion\*
- Option der Nutzung von innovativen Spine- und Faszien-Transmittern für die optimale Behandlung von Rückenbeschwerden und Faszien\*

\* betrifft nur RPW 2

### Indikationen

- Fußsohlenentzündung, Fersenschmerz oder Fersensporn
- Kalkschulter
- Epikondylitis
- Achillodynie
- Retropatellares Schmerzsyndrom
- Schienbeinkantensyndrom
- Insertions-Tendonitis
- Muskelverspannungen
- Myofasziale Triggerpunkte
- Rückenbeschwerden (Spine-Transmitter)
- Faszientherapie (Peri-Transmitter)

| Bezeichnung         | Artikel-Nr. |
|---------------------|-------------|
| Intellect® RPW 2    | 2174KIT     |
| Intellect® RPW Lite | 30680-230V  |

## CHATTANOOGA® Mobile RPW 2 Stoßwelle

Radiale Stoßwelle – pneumatisch



### Wirkungsweise/Aufbau

- Kompakt, leicht und wartungsarm für den mobilen Einsatz
- Übersichtliche und gut erkennbare Navigation
- Praktische Details, wie z. B. der geräuscharme Kompressor
- V-Actor® Option für die Gewebemassage

### Anwendungsgebiete

- Fußsohlenentzündung, Fersenschmerz oder Fersensporn
- Kalkschulter
- Epikondylitis
- Achillodynie
- Retropatellares Schmerzsyndrom
- Schienbeinkantensyndrom
- Insertions-Tendonitis
- Muskelverspannungen
- Myofasziale Triggerpunkte

Bezeichnung

Mobile RPW 2

Artikel-Nr.

2910



## CHATTANOOGA® Intellect® F-SW Stoßwelle

Fokussierte Stoßwelle – elektromagnetisch



### Wirkungsweise/Aufbau

- Körpereigene Heilungsprozesse werden aktiviert
- Verbesserung der Blutzirkulation
- Anregung der Geweberegeneration
- Abklingen vorliegender Entzündungen
- Maßgeschneiderte Behandlungen durch zwei Stand-Offs

- Verbesserte Energiedichte 0,01–0,55 mJ/mm<sup>2</sup>
- Grosser Frequenzbereich: 1–8 Hz
- 3 Fokuszonen
- 12,5 cm Eindringtiefe mit Pinpoint-Fokus


### Anwendungsgebiete

- Pseudoarthrosen
- Tendopathien
- Myofasziale Schmerzsymptome sowie Wundheilungsstörungen
- Epikondylitis
- Kalkschulter
- Tibiakantensyndrom
- Fersensporn
- Patellaspitzensyndrom
- Triggerpunkte
- Plantarfasziitis
- Achillodynie

| Bezeichnung             | Artikel-Nr. |
|-------------------------|-------------|
| F-SW                    | 21090       |
| Transportwagen für F-SW | 4650        |

## CHATTANOOGA® Intellect® Mobile 2

Mobile Geräte für die Elektro- und/oder Ultraschalltherapie

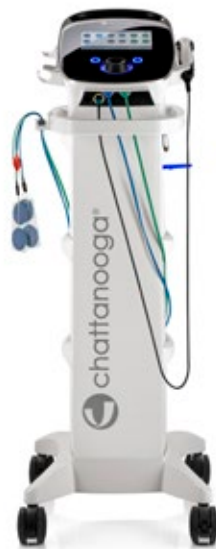

Mobile 2 Combo  
Gerät (STIM + US)  
mit Vakuummodul  
und Wagen

### Pluspunkte

- Ideal für den mobilen Einsatz
- Akku-Betrieb möglich
- Vakuummodul als Option
- Anatomische Bibliothek
- Hochauflösender Touchscreen
- Einfaches Handling voreingestellter Protokolle (SPS Navigationssystem)

### Indikationen Ultraschalltherapie

- Arthrose
- Diverse Schmerzen (z.B. Rheuma)
- Verstauchungen und Prellungen
- Zerrungen, Blutergüsse und Schwellungen
- Muskelverspannungen und -verhärtungen
- Sehnenreizungen
- Gewebeverklebungen

### Indikationen Elektrotherapie

- Diverse Schmerzen
- Muskelatrophie
- Paresen
- Ödeme
- Rheuma
- Weichteilstörungen
- Insertionstendopathien

| Bezeichnung                    | Artikel-Nr. |
|--------------------------------|-------------|
| Mobile 2 US Gerät              | 15-1200     |
| Mobile 2 Stim Gerät            | 15-1202     |
| Mobile 2 Combo Gerät           | 15-1204     |
| Mobile 2 Wagen mit Vakuummodul | 15-1210     |

## CHATTANOOGA® LightForce HPL

High Power Laser FXi 15 Watt, XPi 25 Watt, XLi 40 Watt

### XLi



Zur Behandlung großer und tief gelegener Areale und schnellen Schmerzlinderung mit Dosierungsfeedback in Echtzeit. Der **40 W LightForce® XLi**, der stärkste Laser von Chattanooga, wirkt schneller im Tiefengewebe, um Schmerzen in kürzerer Zeit zu lindern. Der intelligente LightForce Controller und die auf dem Bildschirm angezeigten Protokollempfehlungen erhöhen die Dosiergenauigkeit und helfen Ärzten und Anwendern, ihre Patienten schnell und effektiv zu behandeln.

### XPi



Der **25 W LightForce® XPi** bietet visuelles und haptisches Feedback in Echtzeit, um Ärzten die Durchführung präziser, konsistenter Behandlungen zu ermöglichen. Dank der eingebauten Intelligenz des XPi erfährt der Nutzer, welche Behandlungsköpfe für unterschiedliche Energiedichten idealerweise zu verwenden sind.

### FXi



Für eine schnelle und effektive Behandlung unterwegs. Der **15 W LightForce® FXi** eignet sich perfekt für den Einsatz in Praxen oder medizinischen Einrichtungen in denen die Lasertherapie auch mobil genutzt werden soll. Der mit einem eingebauten Akku versehene leichte FXi lässt sich aufgrund seines geringen Gewichtes von nur 3,2 kg gut transportieren.

### Wirkungsweise/Aufbau

- Große Eindringtiefe mit Leistung bis zu 40 Watt
- Innovative Influence Technologie
- Laserwellenlänge 980 und 810 nm
- Kontinuierlicher oder gepulster Betriebsmodus
- Exklusive Massageball-Technologie
- EMPOWER IQ Applikationssystem
- Evidenz basierte Protokolle via Touch abrufbar
- Intelligenter Controller für Dosierungsfeedback (Ampelsystem) und optimierte Lasertherapie
- Großer Farbtouchscreen
- Akku-Betrieb als Option bei FX

### Anwendungsgebiete

- Nackenschmerzen
- Schulterschmerzen
- Kreuzschmerzen
- Arthrose
- Plantarfaszitis/Fersensporn
- Rückenschmerz
- Muskelverspannungen
- Triggerpunktbehandlungen
- Schulterschmerzen
- Ischias
- Behandlung von Narbengewebe
- Epicondylitis radialis/ulnaris
- Verstauchungen

|                  | XLi                         | XPi                         | FXi                   |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Lasertyp         | Klasse IV, Festkörper       | Klasse IV, Festkörper       | Klasse IV, Festkörper |
| Laserwellenlänge | 980/810 nm                  | 980/810 nm                  | 980/810 nm            |
| Laserleistung    | 1–40 W                      | 1–25 W                      | 0,5–15 W              |
| Betriebsmodi     | Kontinuierlich oder gepulst | Kontinuierlich oder gepulst | Kontinuierlich        |
| oder gepulst     | links                       | XL                          | 82-96275              |
| Zielstrahl       | 650 nm, < 4,5 mW            | 650 nm, < 4,5 mW            | 650 nm, < 4,5 mW      |
| Abmessungen      | 43 × 28 × 26 cm             | 43 × 28 × 26 cm             | 38 × 28 × 20 cm       |
| Gewicht          | 9 kg                        | 9 kg                        | 3,2 kg                |
| Garantie         | 24 Monate                   | 24 Monate                   | 24 Monate             |
| Artikel-Nr.      | SYS-000656-000-00           | SYS-000837-000-00           | SYS-000829-000-00     |

# CHATTANOOGA® Wireless Professional

Mobile Elektrotherapie für Fachkreise



## Wirkungsweise/Aufbau

- Kabelloser, interaktiver Einsatz
- Mi-Technologie
- Indikationsspezifische Programme
- Kompaktes Design – leicht zu transportieren

## Anwendungsgebiete Elektrotherapie

- Fuß/Sprunggelenk
- Kreuzbandersatzplastik
- Endoprothesenimplantation
- Umfangreiche Knorpel-OP
- Meniskusteilresektion
- Meniskusnaht
- Gezieltes Muskeltraining nach Operationen oder traumatisch bedingter Funktionsstörung

Bezeichnung

Wireless Professional

Artikel-Nr.

2532119

# SAUNDERS® Heimgeräte

für Traktionsbehandlung



## Wirkungsweise/Aufbau

- Für manche Patienten eine bewährte Alternative zu chirurgischen Eingriffen
- Die Traktionskräfte greifen direkt am Hinterkopf an, um Kompression im kranioamandulären Bereich zu vermeiden
- Mit der leicht ablesbaren Druckanzeige lässt sich die Kraft jederzeit gut steuern
- Die anwendbare Kraft wird durch ein Überdruckventil begrenzt
- Die reibungsarme Oberfläche des Lumbar HomeTrac gewährleistet eine geschmeidige Bewegung

## Wirksam

- Eine kostengünstige Alternative zu dauerhafter klinischer Pflege
- Das innovative Design des Saunders Cervical Traktionsgerät orientiert sich an der Traktion in der Klinik und sorgt für eine konsistente Behandlung
- Das Cervical Traktionsgerät bietet dem Kliniker alternative Positionierungen, um die Behandlungsmöglichkeiten zu variieren
- Das patentierte pneumatische System gewährleistet genaue und zuverlässige Dosierung der Kraft und leckfreies Arbeiten
- Das Design des Lumbar Traktionsgerät mit geteilter Liege und aktiv beweglicher Behandlungsfläche orientiert sich an der Traktion in der Klinik und sorgt für eine konsistente Behandlung

## Einfach in der Anwendung

- Ein tragbares Produkt, das die Therapietreue und Zufriedenheit des Patienten erhöht
- Patentierte selbstjustierende Nackenkeile gewährleisten einen perfekten Sitz am Saunders Cervical Traktionsgerät
- Patentiertes Pumpendesign mit einfachem „Klick und Passt“-Mechanismus
- Schnelle und einfache Patienteneinrichtung ermöglicht Traktion zu Hause ohne Hilfestellung
- Die rutschfreien Gürtel des Lumbar Traktionsgerät sorgen für bequeme Verbindung von Patient und Gerät

| Version                           | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------|-------------|
| SAUNDERS® Cervical Traktionsgerät | 199594      |
| SAUNDERS® Lumbar Traktionsgerät   | 199603      |

## CHATTANOOGA® Triton 6E DTS®

Wirbelsäulenbehandlung



### Wirkungsweise/Aufbau

- Wärmetherapie durch integrierte Heizung im Rücken- und Lendenpolster
- Benutzerfreundliche Einstellung
- Exakte Einstellung der Dosierung und Wiederholbarkeit
- Kommt der manuellen Traktion sehr nahe
- Umgehende Druckminderung, Mobilisierung und entzündungshemmende Reaktion bei Schmerzpatienten durch Entlastung der LWS bzw. HWS

### Anwendungsgebiete

- Bandscheibenvorfälle-/schmerzen
- Spondylosen
- Beschwerden in den Facettengelenken
- Wurzelkompression
- Hypomobilität
- Kompressionsfrakturen
- Spannungskopfschmerz
- Zervikale Radikulopathie

Bezeichnung

Triton 6E DTS

Artikel-Nr.

4767E-110EU

# CHATTANOOGA® Montane

Behandlungsliegen



Beispiel: Montane Alps – 5-teilige Liegefläche



Alle Montane Behandlungsliegen finden Sie in unserem Produktkatalog 2025/2026 für die Physikalische Therapie!

Gerne schicken wir Ihnen ein Exemplar zu:  
Tel. 0800 292 414 (gebührenfrei)

## Produktmerkmale

- Behandlungsliegen mit 2- bis 7-teiliger Liegefläche, einschließlich einklappbarer Segmente im Kopfteil
- Elektrische Höhenverstellung von 49 cm bis 101 cm für das problemlose und sichere Hinlegen und Aufstehen des Patienten und zur Einstellung der idealen Arbeitshöhe für die Behandlung
- Leicht zugängliche Rundumschaltung für eine einfache Höhenverstellung, von jeder Position an der Liege (360°) erreichbar
- Ermöglicht eine gleichmäßige vertikale Anhebung mit einer Hublast bis zu 150 kg
- 4 Rollfüße erleichtern das genaue Platzieren der Liege
- Motorisiertes verstellbares Mittelteil mit Drainagestellung (optionale Ausstattung)
- Verstellbare Kopfstütze – positive/negative Neigung
- Gesichtsöffnung im Kopfteil mit abnehmbarem Polstereinsatz
- Seitenhalterungen für Stabilisationsgurte gehören zur Standardausstattung
- Gasdruckfedern unterstützen die Einstellung der Kopf und Fußteile
- Integrierte Sicherheitssperbox

## Farbauswahl für die Polsterung

HINWEIS: Farbtafeln unterliegen den Beschränkungen des Farbendrucks und sind nur als allgemeine Richtlinie zu verstehen.

|             |            |      |
|-------------|------------|------|
| Cremeweiß   | Marineblau | Grau |
| Graphitgrau | Schwarz    |      |

| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|-------------|-------------|
| Montane     | 35XXX-XX    |

# CHATTANOOGA® Galaxy

Behandlungsliegen



Beispiel: Galaxy –  
5-teilige Liegefläche



Alle Galaxy Behandlungsliegen finden  
Sie in unserem Produktkatalog 2025/2026  
für die Physikalische Therapie!

Gerne schicken wir Ihnen ein Exemplar zu:  
Tel. 0800 292 414 (gebührenfrei)

## Produktmerkmale

- Behandlungsliegen (Scherenhubsystem) mit 2- bis 5-teiliger Liegefläche, einschließlich einklappbarer Segmente im Kopfteil
- Verstellbares Kopfteil von +40° bis –70° mit Gasdruckfeder
- Rundumschaltung zur elektrischen Höhenverstellung
  - Hublast bis zu 200 kg
- Gesichtsausschnitt im Kopfteil mit abnehmbarem Polstereinsatz
- Beinsegment von 0° bis 90° einstellbar mit Gasdruckfeder
- Zweilagige Polsterung aus nicht entflammbarem, biologisch verträglichem und kratzfestem Polstermaterial in vielen Farben
- Pulverbeschichtetes, äußerst stabiles Gestell mit Scherenmechanismus
- 2 seitliche Halterungen zur Befestigung von Stabilisationsgurt und elastischen Bändern
- Schlingen für Traktionsbehandlung
- Integrierte Sicherheitssperbox: 2 Sicherheitsschlüssel mit magnetischer Codierung
- Hallotronic® System zur elektrischen Höhenverstellung im Bereich von 52 bis 102 cm
- Rutschfeste Gummifüße für Höhenverstellung von 1 cm zur Niveau-regulierung der Liege
- Leicht zugängliches Rollen- und Bremssystem
- 2 Gestelltypen:
  - 2 kleine Laufrollen und 2 Standbeine
  - 4 Lenkrollen mit Zentralbremse sowie 4 Standbeine

## Farbauswahl für die Polsterung

HINWEIS: Farbtafeln unterliegen den Beschränkungen des Farbendrucks und sind nur als allgemeine Richtlinie zu verstehen.

|             |            |      |
|-------------|------------|------|
| Cremeweiß   | Marineblau | Grau |
| Graphitgrau | Schwarz    |      |

| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|-------------|-------------|
| Galaxy      | 31XXX-XX-EU |



# CHATTANOOGA® Huber® 360 Evolution

Neuro Physical Training™



## Pluspunkte

- Einsatz in Reha und Training
- Analysiert, therapiert und dokumentiert
- Orthopädie, Neurologie, Geriatrie
- Für alle Altersgruppen geeignet
- Spielerische Verbesserung von Mobilität, Stabilität, Kraft und Gleichgewicht
- Große Auswahl an Protokollen für orthopädische und neurologische Indikationen auf Knopfdruck abrufbar

## Indikationen

- Hexenschuss, Ischiasschmerz, Bandscheibenvorfall
- VKB-Rupturen
- Chronische und akute Rückenschmerzen
- Schmerzen im Schultergelenk
- Verstauchungen und Brüche
- Hüft-TEP
- Knie-TEP
- Osteoporose
- Fibromyalgie
- Parkinson
- Multiple Sklerose
- Sturzprophylaxe

| Bezeichnung         | Artikel-Nr. |
|---------------------|-------------|
| Huber 360 Evolution | 15-0011E    |

# CHATTANOOGA® Chatt-Tape

Hypoallergenes Kinesio-Tape



## Wirkungsweise/Aufbau

- Chatt-Tape ist hypoallergen (latexfrei), elastisch, atmungsaktiv und medikamentenfrei
- Hohe Elastizität gewährleistet optimale Passform
- Erholung von Muskeln, Sehnen und Bändern kann gefördert werden

| Farbe   | Breite | Länge | Verpackungseinheit | Artikel-Nr. |
|---------|--------|-------|--------------------|-------------|
| Beige   | 5 cm   | 5 m   | 1 Box à 12 Rollen  | 5001        |
| Blau    | 5 cm   | 5 m   | 1 Box à 12 Rollen  | 5002        |
| Schwarz | 5 cm   | 5 m   | 1 Box à 12 Rollen  | 5003        |
| Pink    | 5 cm   | 5 m   | 1 Box à 12 Rollen  | 5004        |

## WIR SIND FÜR SIE DA!

### Service-Hotline Orthopädietechnik

Montag – Freitag: 8.30 – 16.30 Uhr

Tel.: 0800 292 414

Fax: 0800 292 412

E-Mail: [orthopaedietechnik@enovis.com](mailto:orthopaedietechnik@enovis.com)

## WEITERE INFORMATIONEN



**Aktuelle Produktkataloge zum Download:**

[www.enovis-medtech.at/downloads/kataloge](http://www.enovis-medtech.at/downloads/kataloge)

## WIR SIND PARTNER



Kooperationspartner der AGA –  
Gesellschaft für Arthroskopie  
und Gelenkchirurgie



Enovis ist  
Förderpartner  
der DVSE



Förderer  
des Jungen Knies  
der DKG 2025



Das Netzwerk  
im Bereich der  
aktiven Rehabilitation

**enovis™**  
***Creating Better Together™***

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

### Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.