

DONJOY®

Immer gut geführt
Sicherheit bei
Instabilitäten im Kniegelenk

INFORMATION
FÜR ARZT UND FACHHANDEL



**4-Punkt-Rahmenorthesen zur Führung
und Stabilisierung des Kniegelenks**
Einfach. Sicher. Gehen.

DIE KLEINE



DONJOY®
ACL EVERYDAY
HMV-Nr.: 23.04.03.3022

DIE VENTRALE



ORMED®
ARTROCARE® PRO3
HMV-Nr.: 23.04.03.3048

DIE KLASSIKER



DONJOY®
4TITUDE® /
4TITUDE® ADVANCED
HMV-Nr.: 23.04.03.3023
23.04.03.3067

DIE SANFTE



DONJOY®
FULLFORCE®
HMV-Nr.: 23.04.03.3040

DIE STARKE



DONJOY®
ARMOR CI
HMV-Nr.: 23.04.03.3023

DIE INDIVIDUELLE



DONJOY®
DEFIANCE®
HMV-Nr.: Kostenvoranschlag

Informationen zum 4-Punkt-Prinzip, Indikationen und eine Maßtabelle
finden Sie im Mittelteil dieser Broschüre.

Softorthesen bei Bandinstabilitäten und allgemeiner Knie-Instabilität
finden Sie im hinteren Teil dieser Broschüre.


ACL EVERYDAY

Kurze Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung mit Extensions- und Flexionsbegrenzung u. a. zur Versorgung von Kindern

Verfügbar als: ACL-Version


HMV-Nummer: 23.04.03.3022

Breite Kunststoffschelle für stabilen Sitz und hohen Tragekomfort

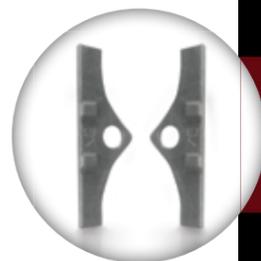

Flaches polyzentrisches Zahnsegmentgelenk mit Extensions- (0°–40°) und Flexionsbegrenzung (20°–90°)

Kurzer Ober- und Unterschenkelrahmen geeignet für kurze Gliedmaßen

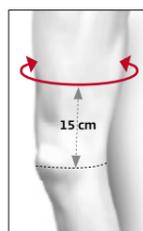

Version	Größe	Artikelnummer ACL EVERYDAY	
		links	rechts
ACL	XS–S	11-1600-x	11-1601-x

-x siehe Größentabelle (Größentabelle und Indikationenübersicht im Mittelteil dieser Broschüre)

ARTROCARE® PRO3

Ventrale Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung mit Extensions- und Flexionsbegrenzung

Verfügbar als: ACL-Version
CI-Zusatzgurt optional

HMV-Nummer: 23.04.03.3048

Ventraler Rahmen für schnelles und einfaches Anlegen der Orthese von vorn


Mediale Abschrägung und Komfortpolster für bequemen und rutschfesten Sitz



Flaches polyzentrisches Zahnsegmentgelenk mit Extensions- (0°–40°) und Flexionsbegrenzung (20°–90°)

Stufenlos einstellbare Klettgurte mit griffsicheren Klettlaschen

Weit umschließende Rahmenkonstruktion gewährleistet hohe Seitenstabilität

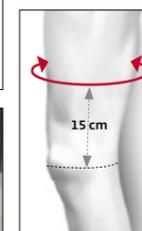

Version	Größe	Artikelnummer ARTROCARE® PRO3	
		links	rechts
ACL	XS–3XL	11-1624-x	11-1625-x

-x siehe Größentabelle (Größentabelle und Indikationenübersicht im Mittelteil dieser Broschüre)

ANLEGEN VON VORN



4TITUDE® 4TITUDE® ADVANCED

Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung mit Extensions- und Flexionsbegrenzung

Verfügbar als: ACL- und CI-Version
PCL-Version (nur 4TITUDE®)

HMV-Nummer: 23.04.03.3023
23.04.03.3067 (ADVANCED)

Flaches polyzentrisches Gelenk zur physiologischen Knieführung

Medial abgeschrägter Oberschenkelrahmen und Komfortpolsterung für bequemen Sitz


Flache Gurtführung – passt gut unter die Kleidung

Schienbeinpolster mit Fenster – nimmt Druck von der Patellasehne

KLASSISCHE VERSORGUNG



Flaches polyzentrisches Zahnsegmentgelenk mit Extensions- (0°–40°) und Flexionsbegrenzung (20°–90°)

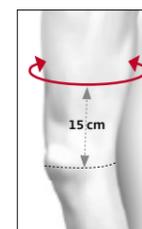

Version	Größe	Artikelnummer 4TITUDE®		Artikelnummer 4TITUDE® ADVANCED	
		links	rechts	links	rechts
ACL	XS – 3XL	11-0831-x-06060	11-0830-x-06060	11-0844-x	11-0843-x
PCL	XS – 3XL	11-0833-x-06060	11-0832-x-06060	–	–
CI	XS – 3XL	11-0835-x-06060	11-0834-x-06060	11-0848-x	11-0847-x

-x siehe Größentabelle (Größentabelle und Indikationenübersicht im Mittelteil dieser Broschüre)

4TITUDE® ADVANCED

FULLFORCE®

Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung mit Extensions- und Flexionsbegrenzung sowie Extensionsdämpfung

Verfügbar als: ACL- und CI-Version

HMV-Nummer: 23.04.03.3040

SANFTE DÄMPFUNG

Medial angeschrägter Oberschenkelrahmen erhöht den Tragekomfort



Flaches FOURCEPOINT™-Gelenk mit integrierter 3-stufiger Extensionsdämpfung und einstellbarem Bewegungsumfang

Funktionselemente geschützt unter den Kondylenpolstern angeordnet

Anti-Migration Band schützt sicher vor Verrutschen


Edle Carbon Optik



Extensionsdämpfung



Flexion ungedämpft

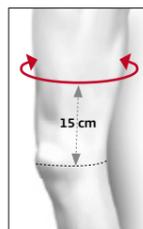

Version	Größe	Artikelnummer FULLFORCE™	
		links	rechts
ACL	XS - 3XL	11-0259-x	11-0258-x
CI	XS - 3XL	11-0265-x	11-0264-x

-x siehe Größentabelle
(Größentabelle und Indikationenübersicht im Mittelteil dieser Broschüre)

ARMOR CI

Besonders stabile Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung mit Extensions- und Flexionsbegrenzung


Verfügbar als: CI-Version

HMV-Nummer: 23.04.03.3023

BESONDERS STARK

Schwenkbare Gurtösen sorgen für eine optimale Gurtführung am Bein

Extrem stabiles Flugzeugaluminium mit kratzfester Oberfläche für hohe Beanspruchungen

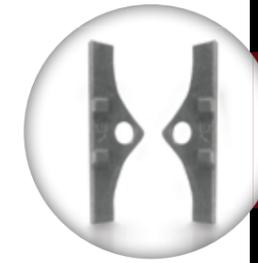


Flaches polyzentrisches Zahnsegmentgelenk mit Extensions- (0°-40°) und Flexionsbegrenzung (20°-90°)

Kurzer Unterschenkelrahmen - ideal bei hohem Schuhwerk



ARMOR mit optionalem Patella-/Schienbeinschutz

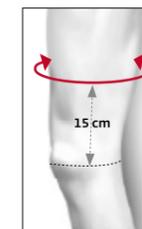

Version	Größe	Artikelnummer ARMOR CI	
		links	rechts
CI	XS - 3XL	11-1030-x-26000	11-1029-x-26000

-x siehe Größentabelle
(Größentabelle und Indikationenübersicht im Mittelteil dieser Broschüre)

DEFIANCE®

Maßgefertigte Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung mit Extensions- und Flexionsbegrenzung

Verfügbar als: ACL-, PCL- und CI-Version

HMV-Nummer: Kostenvoranschlag

Hohe Individualität durch leichten, extrem stabilen Carbonfaser-Rahmen in Kurz- oder Standardlänge, je nach Beinform

CARBON-MASSORTHESE



STANDARD FOURPOINT™ DROP LOCK

Gelenkvarianten

Breite Farb- und Musterpalette für den Rahmen

GRUNDFARBEN			METALLICFARBEN		GRAFIK
		weitere Grundfarben frei kombinierbar			



Rasches und einfaches Maßnehmen mit dem DEFIANCE® Messgerät




4-Punkt- Rahmenorthesen

Das original DONJOY® 4-Punkt-System senkt gezielt die Belastung der Kreuzbänder und unterstützt den Therapieerfolg.

- 1+2** Fixierung der Orthese
Der Rahmen umfasst ventral den Oberschenkel und dorsal den Unterschenkel.
- 3** Der distale Oberschenkelgurt drückt den Femur nach anterior.
- 4** Der proximale Unterschenkelgurt übt eine Vorspannung auf die Tibia aus und wirkt so der vorderen Schublade (ACL-Version) entgegen.

Versionen der Gurtführung:

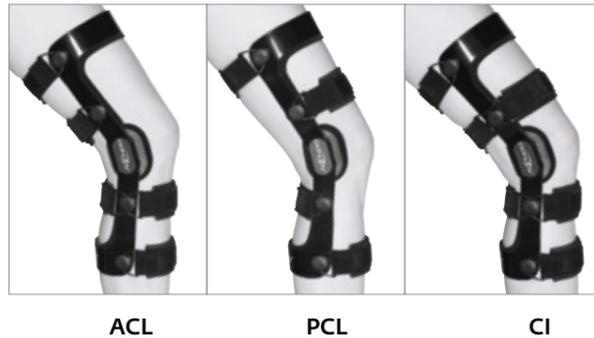


ACL

PCL

CI

Indikationen:

- Verletzungen oder Instabilitäten des Kreuzbandes, mit oder ohne Begleitverletzungen:
 - nur vorderes Kreuzband (**ACL**-Version)
 - nur hinteres Kreuzband (**PCL**-Version)
 - vorderes und hinteres Kreuzband gleichzeitig (**CI**-Version)
- Seitenbandrupturen oder -instabilitäten
- Meniskusverletzungen
- Schwere Kniegelenkinstabilitäten, konservative Behandlung

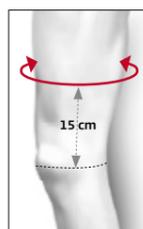

Größentabelle		
-x	Größe	Umfang*
-1	XS	33 – 39 cm
-2	S	39 – 47 cm
-3	M	39 – 53 cm
-4	L	53 – 60 cm
-5	L	60 – 67 cm
-6	XXL	67 – 75 cm
-7	3XL	75 – 81 cm

*Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

Softorthesen bei Bandinstabilitäten
und allgemeiner Knie-Instabilität
Einfach. Sicher. Gehen.



OPTIONALE
KÜHLUNG &
KOMPRESSION

OHNE
BEWEGUNGS-
BEGRENZUNG

MIT BEWEGUNGS-
BEGRENZUNG



DONJOY®
PLAYMAKER® XPERT
WRAP & SLEEVE
HMV-Nr.: 23.04.03.0066



DONJOY®
PLAYMAKER®
EVEREST &
EVEREST PRO

HMV-Nr.: 23.04.03.0064
23.04.03.1048



DONJOY®
PLAYMAKER® II
WRAP & DONUT
HMV-Nr.: 23.04.03.2026

PLAYMAKER® XPERT WRAP & SLEEVE

Knieführungsorthesen **ohne**
Extensions-/Flexionsbegrenzung

HMV-Nummer: 23.04.03.0066

Indikationen:

- Leichtere bis mittlere Kniegelenkinstabilitäten, chronische Instabilität
- Schädigung von Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände des Kniegelenks

Integrierte Silikonpelotte zur Entlastung der Kniescheibe (nur SLEEVE)


Breite, zirkuläre Gurte mit griffigen Klettlaschen für sichere Fixierung

Durchgehender Klettverschluss für bequemes Anlegen von vorn und Anpassung an den Beinumfang (nur WRAP)

Atmungsaktives Netzmaterial für ein angenehmes Hautklima



Anlegen der WRAP-Version

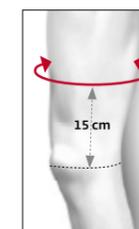

OHNE BEWEGUNGSBEGRENZUNG



Version	Größe	Artikelnummer PLAYMAKER® XPERT
WRAP	XS - 3XL	82-0023-x
SLEEVE	XS - 3XL	82-0022-x

-x siehe Größentabelle im Mittelteil dieser Broschüre

PLAYMAKER® EVEREST™

Knieführungssorthese **ohne** Extensions-/ Flexionsbegrenzung, mit **optionaler Kühlung und Kompression**

HMV-Nummer: 23.04.03.0064

Indikationen:

- Stabilisierung und Führung des Kniegelenks bei freiem Bewegungsumfang
- Schädigung von Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände des Kniegelenks

Pumpe mit Schlauch

Integrierte aufpumpbare Luftkammer ermöglicht eine individuell einstellbare Kompression

Universalgröße, kann links und rechts verwendet werden

Flache polyzentrische Gelenkschienen zur Stabilisierung mit Hyperextensionsschutz



DONJOY®

OHNE BEWEGUNGSBEGRENZUNG



Wiederverwendbare Gel-Packs zur Kälteanwendung in Verbindung mit Kompression

Seite	Größe	Knieumfang	Artikelnummer
U	U	bis 60 cm	82-0016

PLAYMAKER® EVEREST™ PRO

Knieführungssorthese **mit** Extensions-/ Flexionsbegrenzung und **optionaler Kühlung und Kompression**

HMV-Nummer: 23.04.03.1048

Indikationen:

- Stabilisierung und Führung des Kniegelenks mit erforderlicher Begrenzung des Bewegungsumfanges
- Schädigung von Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände des Kniegelenks

Integrierte aufpumpbare Luftkammer ermöglicht eine individuell einstellbare Kompression

Werkzeuglos einstellbare Gelenkschienen mit Extensions- und Flexionsbegrenzung

Pumpe mit Schlauch

Universalgröße, kann links und rechts verwendet werden

Werkzeuglos einstellbare Gelenkschienen mit Extensions- und Flexionsbegrenzung



DONJOY®

MIT BEWEGUNGSBEGRENZUNG



Wiederverwendbare Gel-Packs zur Kälteanwendung in Verbindung mit Kompression

Seite	Größe	Knieumfang	Artikelnummer
U	U	bis 60 cm	82-0017

PLAYMAKER® II WRAP & DONUT

4-Punkt-Knieführungsorthesen mit
Extensions-/Flexionsbegrenzung

HMV-Nummer: 23.04.03.2026


Indikationen:

- Mittlere Kniegelenkinstabilitäten, chronische Instabilität
- Schädigung von Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände des Kniegelenks
- Meniskusverletzungen

Elastisches Netzmaterial sorgt für Kompression und Propriozeption sowie ein angenehmes Hautklima

Lange anformbare Gelenkschienen zur Stabilisierung und Führung des Kniegelenks


Sichere Fixierung durch 4 zirkuläre Gurte mit griffigen Klettverschlüssen

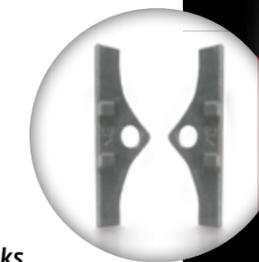

Flaches polyzentrisches Zahnsegmentgelenk mit Extensions- (0°–40°) und Flexionsbegrenzung (20°–90°)



Extra weiches und dünnes Material auf der Rückseite für hohen Tragekomfort

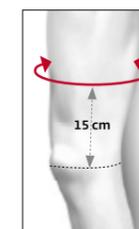

MIT BEWEGUNGSBEGRENZUNG



Version	Größe	Artikelnummer PLAYMAKER® II
WRAP	XS – 3XL	11-3497-x
DONUT	XS – 3XL	11-3499-x

-x siehe Größentabelle im Mittelteil dieser Broschüre



ARTROMOT® K1

Für das Knie- und Hüftgelenk

HMV-Nummer: 23.04.01.2006

Zur postoperativen, kontinuierlichen und passiven Bewegung des Kniegelenkes (continuous passive motion = CPM).

- Verhindert Gelenkverklebungen und Gelenksteifen
- Verbessert die Heilung von Gelenkknorpel, Sehnen, Bändern und Weichteilgeweben
- Verkürzt den stationären Aufenthalt und die Gesamtbehandlungsdauer

Indikationsbeispiele:

- Arthrotomien und Arthroskopien in Kombination mit Synovektomie, Arthrolyse
- Kreuzbandplastiken
- Komplexe Knieoperationen
- Nach Gelenkmobilisation in Narkose
- Arthrosen mit Bewegungseinschränkung

Zum Einsatz im anspruchsvollen klinischen Alltag und im Homecare-/Mietservice.

Patientenchipkarte



ARTROMOT®-K1
Comfort Chip



Auch als XL-
Version verfügbar!



CPM Kniebewegungsschienen sind für gesetzlich versicherte Patienten weiterhin erstattungsfähig!

Mehr Info:
www.djoglobal.de/cpm-therapie-artromot